

HAIRMAX®
The science of hair growth.™



HairMax LaserComb®

Prima 9

GUIDA RAPIDA D'USO

HairMax LaserComb® è un dispositivo progettato con componenti di qualità ed è altamente efficace se usato correttamente.



Ti preghiamo di leggere attentamente il Manuale Utente prima di utilizzare il tuo dispositivo.

Modello Prima 9 Spazzola Laser



Utilizza la spazzola laser Prima 9 per 11 minuti 3 volte a settimana per almeno 16 settimane. I trattamenti cosmetici dovrebbero essere effettuati a giorni alterni, ad esempio il lunedì, mercoledì e venerdì.


È consigliato, ma non essenziale, che la spazzola laser venga utilizzata sul cuoio capelluto appena deterso. I tuoi capelli possono essere bagnati, tamponati o asciutti. La spazzola laser dovrebbe essere utilizzata prima di applicare qualsiasi trattamento topico, gel, spray o maschera.

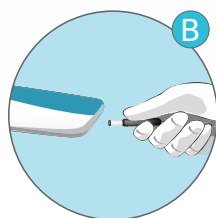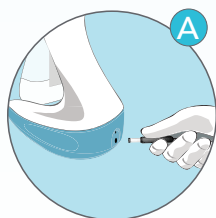

- **Ricarica la tua spazzola laser**

usando la base di ricarica (Figura A) o inserendo il cavo di alimentazione nell'apposito attacco della spazzola (Figura B). Per la prima carica, lascia ricaricare completamente la tua spazzola laser, ci impiegherà 4-6 ore.

La spia luminosa sul pulsante di accensione lampeggerà durante il processo di carica. Una volta completata la carica, la spia luminosa diventerà fissa.

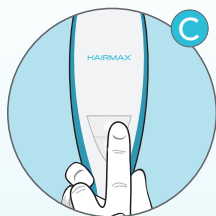


- **Avvia la spazzola laser**

tenendo premuto il pulsante di accensione finché la spia luminosa non si accenderà. Poi, premi il pulsante laser fino a farlo accendere: la spazzola laser è ora pronta per l'utilizzo (Figura C).

- **Effettua il test di sensibilità cutanea**

prima di iniziare il trattamento cosmetico (consulta il tuo manuale utente).

Se il test ha esito negativo, inizia il trattamento cosmetico posizionando la spazzola laser piatta sul tuo cuoio capelluto in modo che entrambi i lati con i dentini siano a contatto con esso (Figura D).

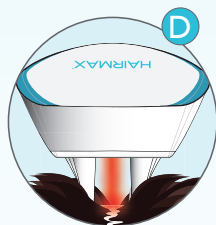

- **Parti dall'attaccatura dei capelli**

muovendo la spazzola laser lentamente, dalla parte anteriore a quella posteriore del cuoio capelluto, pettinando il capello e tenendo la spazzola ferma 4 secondi su ogni centimetro di cute (Figura E).

Non sollevare la spazzola laser dal tuo cuoio capelluto mentre pettini da davanti a dietro.



- **Solleva la spazzola laser dal tuo cuoio capelluto**

e posizionala su una nuova area, quindi falla scorrere fino all'attaccatura dei capelli.

Prosegui in questo modo da davanti a dietro e da un lato all'altro (Figura F) finché non avrai ultimato l'applicazione sull'intero cuoio capelluto.

La spazzola laser emette una vibrazione ogni 4 secondi: ciò significa che dovrai spostarla verso l'area successiva. Ripeti questi passaggi per una durata totale di 11 minuti.




- **Se hai i capelli lunghi**

usa le dita per spostare i capelli durante l'utilizzo della spazzola laser, in modo tale da assicurarti che la tecnologia laser entri in contatto con il tuo cuoio capelluto (Figura G).



- **A fine trattamento cosmetico**

spegni la spazzola laser tenendo premuto il pulsante di accensione (il pulsante più in basso) fino allo spegnimento della spia luminosa (Figura H).

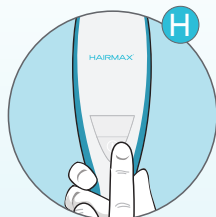

- Nota bene

- Il tempo totale di ogni trattamento cosmetico con la spazzola laser Prima 9 è di 11 minuti.
- È importante muovere la spazzola laser molto lentamente. Ricordati che stai sottoponendo il cuoio capelluto alla tecnologia laser. Se sposti il laser troppo velocemente, il trattamento cosmetico non raggiungerà i risultati ottimali.
- È necessario utilizzare la spazzola laser seguendo le istruzioni.
- Se per qualche motivo dovessi incontrare difficoltà nell'utilizzo del tuo dispositivo, ti invitiamo a consultare la sezione "Risoluzione Problemi" all'interno del tuo Manuale Utente.