

GloPRO®

REGIME PER IL VISO



1

DETERGI

Detergi la pelle con il tuo prodotto preferito.



2

PREPARA


Prima del trattamento con GloPRO®, prepara la zona con i Prep Pad. Puoi trattare viso, collo, décolleté, corpo e labbra.



3

TRATTA

Fai scivolare il GloPRO® sulle zone che vuoi trattare con movimenti orizzontali, verticali e diagonali. Utilizzalo su guance, mento, linee naso-labiali, fronte e linee tra le sopracciglia.

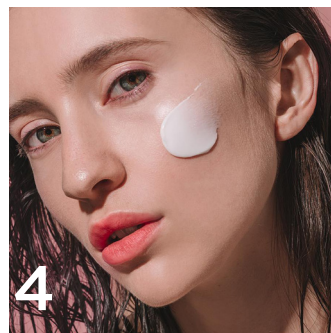

4

APPLICA

Procedi con la tua beauty routine, applicando subito dopo i tuoi sieri e le tue creme preferite.

GloPRO®


REGIME PER IL CORPO



1

PREPARA

Prima del trattamento con GloPRO®, prepara la zona con i Prep Pad. Puoi trattare viso, collo, décolleté, corpo e labbra.

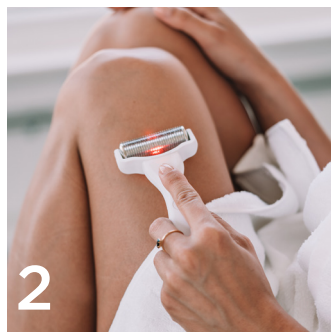

2

TRATTA

Fai scivolare il GloPRO® sulle zone che vuoi trattare con movimenti orizzontali, verticali e diagonali. Utilizzalo su cosce, pancia, retro delle braccia, sopra le ginocchia e lato B.



3

APPLICA

Procedi con la tua beauty routine, applicando subito dopo tue creme corpo preferite.

BEAUTYBIO

FAQ

PERCHE' DOVREI PREFERIRE GloPRO® AD ALTRI DISPOSITIVI DI MICRONEEDLING?

Grazie alle quattro testine intercambiabili disponibili con aghi di diverse misure, GloPRO® può essere utilizzato per trattare diverse aree come viso, occhi, labbra e corpo.

IN QUALE MOMENTO DEL GIORNO DEVO USARE GloPRO®?

Ti consigliamo l'utilizzo del microneedling di GloPRO® almeno 2-3 volte alla settimana durante la routine di skincare serale, trattando ciascuna area per 60 secondi.

QUANDO VEDRO' I RISULTATI?

I risultati variano in base al tipo di pelle e alla problematica.

COSA SUCCEDERÀ SE HO LA PELLE SENSIBILE? MI FARA' MALE?

Potresti notare un rossore naturale della pelle, è normale. Potrai comunque continuare a usare GloPRO® il giorno successivo durante la routine serale.

LA MIA PELLE DIVENTERA' ROSA O SI ARROSSERA'? E' NORMALE?

È assolutamente normale vedere un leggero arrossamento della pelle. GloPRO® stimola il processo naturale di rigenerazione cutanea e le guance potrebbero arrossarsi. Questo rossore diminuirà. E' anche per questo che consigliamo l'utilizzo di GloPRO la sera e poi andare a dormire.

LA MIA PELLE SARA' SECCA DOPO L'UTLIZZO DI GloPRO®?

GloPRO® aiuta a migliorare l'assorbimento, perciò ti consigliamo di fare un patch test con una delle creme o dei sieri della tua routine abituale. Utilizza un idratante efficace subito dopo il trattamento.

POSSO UTILIZZARE GloPRO® CON R45 THE REVERSAL?

Sì.