

# NuFACE Trinity

## Trattamento facciale



### 1. Prepara

Pulisci accuratamente il viso, rimuovendo ogni traccia di trucco e olii dalla pelle.

### 2. Fai scivolare

Applica il gel Primer NuFACE sull'area che andrai a trattare, e fallo semplicemente scivolare lungo i contorni del tuo viso.

### 3. Termina


Rimuovi il Primer NuFACE e applica il tuo idratante preferito.

## Trattamento cosmetico viso avanzato per migliori risultati 15 minuti al giorno in aggiunta agli step di base

Questa tecnica agisce in modo mirato portando gli impulsi di microcorrente al muscolo in modo ottimale, per un migliore risultato. Solleva e trattieni ogni posizione per 5-10 secondi (1-2 bip\*).

## Trattamento cosmetico viso di base 5 minuti al giorno

Le frecce indicano la direzione lungo cui far scivolare le sfere di NuFACE. Ripeti gli step per 3 volte. Ogni step dovrebbe durare 5 secondi (1 bip\*)  
\*NuFACE emette un segnale acustico ogni 5 secondi.

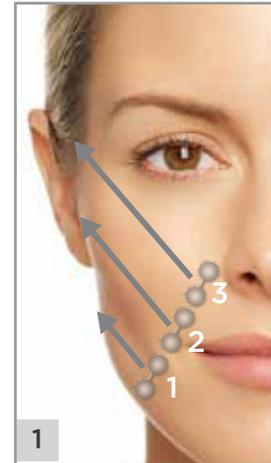

1. Posiziona le sfere sulla piega nasolabiale, fai scivolare NuFACE verso l'orecchio evitando il muscolo orbitale.



2. Posiziona le sfere leggermente al di sopra delle sopracciglia e fai scivolare verso l'attaccatura dei capelli.



3. Sotto la mandibola, muovi NuFACE verso l'alto e tieni le sfere orizzontalmente.



4. Sollevo e trattieni con la sfera inferiore lungo il contorno della mandibola, tenendo l'altra sfera più in alto. Continua per tutta la linea mandibolare.



5. Sollevo e trattieni le sfere orizzontalmente nell'area sotto lo zigomo.



6. Sollevo e trattieni le sfere orizzontalmente nella zona della fronte.