

# LIFT PLUS

## 60 SECOND FACE LIFT

guida all'uso



the beauty specialists

## AVVERTENZE

- **Leggere tutte le istruzioni con attenzione e conservarle per consultazioni successive.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli otto anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenze, se controllati e se hanno ricevuto istruzioni in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e compreso i possibili pericoli ad esso connessi. Non consentire ai bambini di giocare con questo apparecchio. Non consentire ai bambini di eseguire la pulizia e la manutenzione di questo apparecchio senza supervisione.
- Questo dispositivo **NON DEVE** essere utilizzato su donne in stato di gravidanza o su soggetti affetti dalle seguenti patologie: disturbi cardiaci, pazienti sottoposti a terapie per la pressione bassa, soggetti affetti da epilessia, sclerosi multipla o su pazienti convalescenti a causa di interventi chirurgici.
- Prestare particolare attenzione al posizionamento dei contatti a sfera in prossimità degli occhi. Assicurarsi che i contatti a sfera sulla pelle siano sempre ad almeno 1 cm di distanza dall'occhio.

## INFUSIONE GALVANICA (IONTOFORESI)

- FASE 2**  
Posizionare un cerotto sull'area da trattare. Sistemare l'altro cerotto sull'altro lato del viso.
- FASE 3**  
Applicare un'abbondante quantità di gel conduttivo sul contatto a sfera (-), per garantire un buon contatto con la pelle.
- FASE 4**  
Premere il tasto Programma/On/Off per 3 secondi per accendere l'apparecchio. Una volta acceso, l'apparecchio emette un segnale acustico e il display LCD blu si illumina. L'apparecchio inizierà il programma 1. Premere ripetutamente il tasto Programma/On/Off per selezionare il programma 4.
- FASE 5**  
Posizionare i contatti a sfera in modo da tenere il contatto (-) sulla pelle e il contatto (+) sul cerotto. Aumentare l'intensità premendo il tasto (+) fino a sentire un formicolio costante. Sono 10 i livelli di intensità per il trattamento di infusione.  
**Nota:** se in qualunque momento la sensazione è fastidiosa, diminuire l'intensità premendo il tasto (-). Tenendo premuto i pulsanti (+) o (-) si scorre rapidamente tra i livelli di intensità.
- FASE 6**  
Con movimenti lenti e leggeri, spostare l'apparecchio avanti e indietro lungo il cerotto per 60 secondi. Dopo 60 secondi, l'apparecchio emette un segnale acustico per indicare che si dovrebbe passare al cerotto successivo.
- FASE 7**  
Ripetere il processo sul cerotto successivo. Continuare il trattamento alternando tra i cerotti per 10-30 minuti.  
**Nota:** Per prolungare il trattamento di infusione, lasciare i cerotti sul viso fino a 60 minuti. Dopo avere tolto i cerotti, massaggiare delicatamente stendendo i residui sulla pelle.
- FASE 8**  
Spegnere l'apparecchio premendo il tasto Programma/On/Off per 3 secondi. L'apparecchio emette un segnale acustico e poi si spegne.

## CURA E MANUTENZIONE

- Pulire l'apparecchio con un panno umido. **NON** usare solventi o detergenti.
- **NON** immergere l'apparecchio in acqua.
- **NON** smontare o riparare l'apparecchio. L'apparecchio non contiene componenti soggette a manutenzione da parte dell'utente. In caso di problemi nell'utilizzo dell'apparecchio, contattare il nostro Reparto di Assistenza Clienti.
- In caso di danneggiamento, non usare l'apparecchio.
- **NON** usare l'apparecchio in prossimità di dispositivi a onde corte o a microonde.
- Se l'apparecchio funziona in modo anomalo è probabile che sia esposto a interferenze elettromagnetiche, ad esempio quelle di motori elettrici o altoparlanti. Scariche elettrostatiche possono provocare l'interruzione del dispositivo. In tal caso eliminare la sorgente di interferenza e spegnere e riaccendere l'apparecchio per ripristinare il normale funzionamento.

## SMALTIMENTO

La direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per favorire il riciclo dei prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclo, al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente, di trattare adeguatamente le sostanze tossiche e di evitare la proliferazione di discariche. Questo prodotto è classificato come apparecchio elettrico o elettronico; pertanto occorre smaltirlo nel modo corretto e conformemente alle normative locali in materia. **NON** deve essere smaltito insieme alla spazzatura domestica.

## ASSISTENZA CLIENTI

Se avete domande, vi preghiamo di contattarci a: [online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)  
Per il riordino di accessori, visitare il sito [www.riobeauty.com](http://www.riobeauty.com) o contattare il distributore di zona.



[www.riobeauty.com](http://www.riobeauty.com)  
© The Dezac Group Ltd 2019  
Prodotto da The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, Inghilterra GL53 7ET

1-IN-FAL6-I/1.1



## INFUSIONE GALVANICA (IONTOFORESI)

### REGIME DEL TRATTAMENTO

Si consiglia l'utilizzo dei cerotti al collagene e retinolo solo una volta nell'arco delle 24 ore. In caso di sensibilità cutanea, si consiglia di fare passare 48 ore tra un trattamento e l'altro.

### CHE COSA ASPETTARSI

I cerotti sono sagomati per adattarsi sotto l'occhio, sulla fronte, attorno alla bocca e sul mento. Il programma di infusione provoca una sensazione continua ad alta frequenza.

Si consiglia di iniziare con un livello di intensità basso su ciascuna area da trattare, che va ad aumentare finché non si avverte una sensazione di formicolio costante.

## INFUSIONE GALVANICA (IONTOFORESI)

### INFORMAZIONI SUI CEROTTI

- Gran parte dell'infusione avviene nei primi 5-15 minuti su ciascuna area da trattare, ma i cerotti possono rimanere sul viso anche per un'ora.
- Il retinolo si decompone facilmente, pertanto è necessario conservare i cerotti in un luogo fresco e asciutto, lontano dai raggi del sole. Si potrebbe preferire conservarli nel frigorifero per avere un cerotto con gel rinfrescante pronto per il trattamento.
- Il retinolo può rendere la pelle più sensibile ai raggi solari. Dopo l'uso, si consiglia di utilizzare una crema solare con fattore di protezione elevato.
- Prima del trattamento, assicurarsi che i cerotti siano bene aderenti al viso e non si staccano.
- Muovere delicatamente i contatti a sfera sul cerotto e sulla pelle.
- I cerotti sono monouso.

### AREE DA TRATTARE


- FRONTE
- ANGOLO ESTERNO DELL'OCCHIO (ZAMPE DI GALLINA)
- PARTE SOTTO L'OCCHIO
- ZONA NASOLABIALE
- MENTO
- LABBRIO SUPERIORE (cerotto pieghevole)



## INFUSIONE GALVANICA (IONTOFORESI)




**IMPORTANTE:** per l'infusione, è necessario tenere in considerazione la polarità dei contatti a sfera. Il contatto a sfera (+) deve rimanere sul cerotto mentre il contatto a sfera (-) rimane sulla pelle.

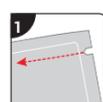


**FASE 1**  
Pulire a fondo la pelle e asciugarla. Strappare lungo il bordo dentellato della bustina del cerotto al collagene e retinolo, togliere il cerotto dalla copertura di plastica e, per trovare il gel, staccare lo strato di protezione dal cerotto.

## TONIFICAZIONE CON TECNOLOGIA FARADICA

Se si utilizza Lift Plus sul viso, ci si può rendere conto dell'allenamento di alcuni muscoli. Sono qui illustrati i principali muscoli facciali.

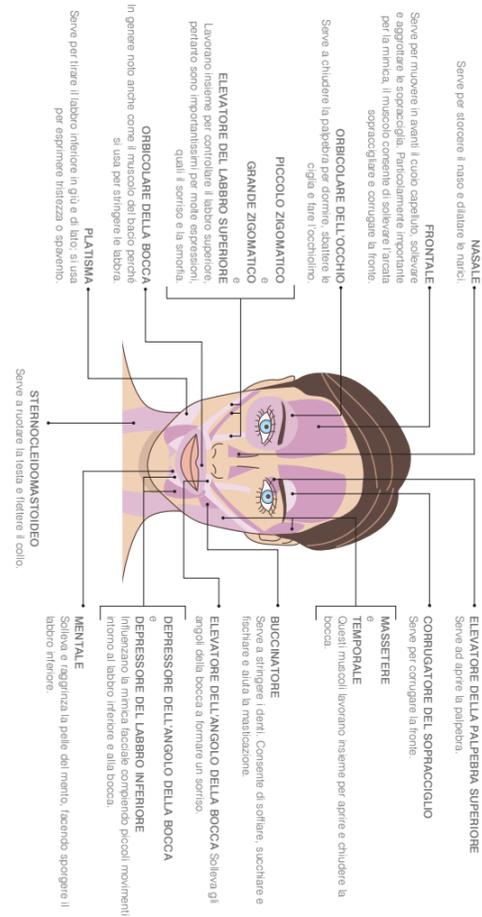

## INFUSIONE GALVANICA (IONTOFORESI)

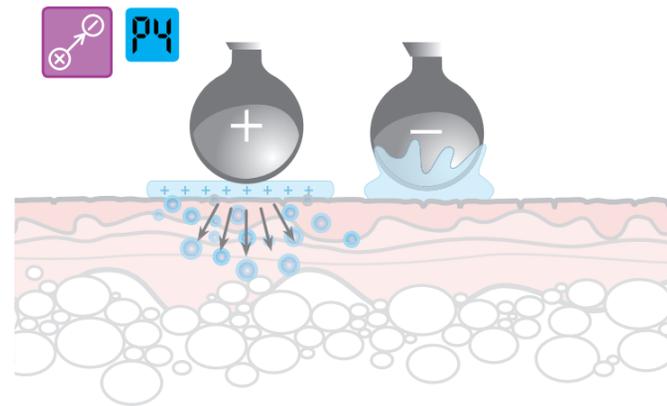

I cerotti Lift Plus contengono collagene a carica positiva e retinolo, con effetto anti-rughe e anti-età. Il posizionamento del contatto positivo sul cerotto e di quello negativo sulla pelle favorisce l'assorbimento transdermico di questi ingredienti attivi.

## AVVERTENZE

- Il dispositivo **NON DEVE** essere utilizzato su aree cutanee affette da patologie quali rosacea, acne pustolosa, abrasioni cutanee, cute sensibile oppure su zone su cui sono presenti cicatrici, nei o vene varicose.
- Se il gel o i cerotti vengono a contatto con gli occhi, risciacquare accuratamente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
- Proteggere gli indumenti e le zone circostanti.
- Solo per uso esterno.


## LA SCIENZA

Con l'invecchiamento, i muscoli facciali perdono di tono e le rughe diventano sempre più definite. Lift Plus combina due tecnologie professionali che contribuiscono a tonificare, rassodare e ringiovanire il viso.

**La TONIFICAZIONE FARADICA** sfrutta la tecnologia dell'elettrostimolazione muscolare (EMS). Sono gli impulsi EMS che, insieme al gel conduttivo, agiscono delicatamente tonificando e rassodando i tratti del volto che presentano cedimenti.

**L'INFUSIONE GALVANICA (iontoforesi)** sfrutta la nuovissima e delicata tecnologia con microcorrenti per l'infusione transdermica di ingredienti attivi da cerotti al collagene e retinolo, contribuendo a ridurre l'insorgenza di linee sottili e rughe oltre che ad aumentare l'elasticità della pelle.

## LEGENDA

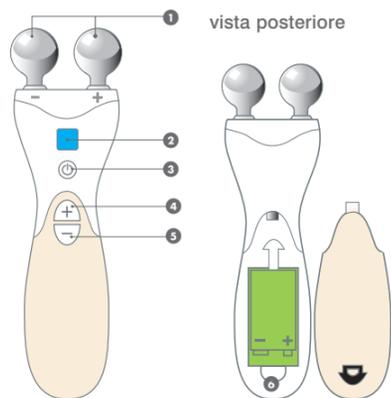

- 1 Contatti a sfera (-) e (+)
- 2 Display LCD
- 3 Tasto Programma/On/Off
- 4 Tasto di aumento dell'intensità (+)
- 5 Tasto di riduzione dell'intensità (-)
- 6 Scoperto batterie

## DISPLAY LCD

**P1** I programmi vengono visualizzati con una "P" seguita dal numero del programma.

**01** Il livello di intensità viene visualizzato come mostra l'immagine.

Premere brevemente i pulsanti (+) o (-) per cambiare il livello di intensità in incrementi singoli. Tenendo premuto i pulsanti (+) o (-) si scorre rapidamente tra i livelli di intensità.


Il display LCD blu rimane acceso per 5 secondi e poi si spegne se non viene premuto alcun tasto.

**Spegnimento automatico:** Se non viene premuto nessun pulsante per 30 minuti, l'apparecchio emette un segnale acustico e si spegne.


**Timer 60 secondi:** L'apparecchio emetterà un segnale acustico ogni 60 minuti per indicare che è terminato un ciclo di trattamento.

## LEGENDA

### INFORMAZIONI SULL'INSERIMENTO DELLA BATTERIA

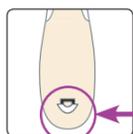

Per inserire la batteria, staccare il gancio e aprire il coperchio. Collegare una batteria alcalina PP3 da 9V facendo attenzione che il terminale + sia come illustrato in figura. Accertarsi che il nastro di sgancio della batteria si trovi sotto ad essa e riporre il coperchio.

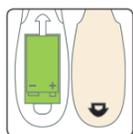

- Se l'apparecchio resta inutilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le pile.
- NON usare pile ricaricabili.
- Smaltire correttamente le pile attenendosi alle disposizioni previste dalle normative locali in materia.

### PATCH TEST ✓


**Importante:** eseguire sempre un patch test con il gel conduttivo su una superficie poco visibile della pelle per monitorare eventuali reazioni cutanee. Attendere 24 ore. In caso di irritazione non continuare il trattamento.

Analogamente, se si manifesta una reazione cutanea al primo utilizzo dei cerotti al collagene e retinolo, non continuare il trattamento.

## PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Programma	Trattamento	Tecnologia	Livelli di intensità	Gel/cerotti
P1	<b>RASSODAMENTO</b> - Contrazioni muscolari ritmiche della durata di 2 secondi, per migliorare la tonicità dei muscoli con un breve intervallo di 3 secondi tra un impulso e l'altro.	Faradica	1-20	Gel conduttivo
P2	<b>RASSODAMENTO PROLUNGATO</b> - Offre una tonicità muscolare prolungata con intensità variabili preprogrammate per ottimizzare l'allenamento.	Faradica	1-20	Gel conduttivo
P3	<b>TONIFICAZIONE CON LEGGERI COLP</b> - Rapida azione stimolante. L'azione del massaggio a impulsi dura cinque secondi, seguiti da una pausa di tre secondi.	Faradica	1-20	Gel conduttivo
P4	<b>INFUSIONE</b> - L'infusione a iontoforesi sfrutta le microcorrenti per trasportare in profondità gli ingredienti attivi che aiutano la rigenerazione e il ringiovanimento cutaneo	Galvanica	1-10	Gel conduttivo e cerotti

## TONIFICAZIONE CON TECNOLOGIA FARADICA

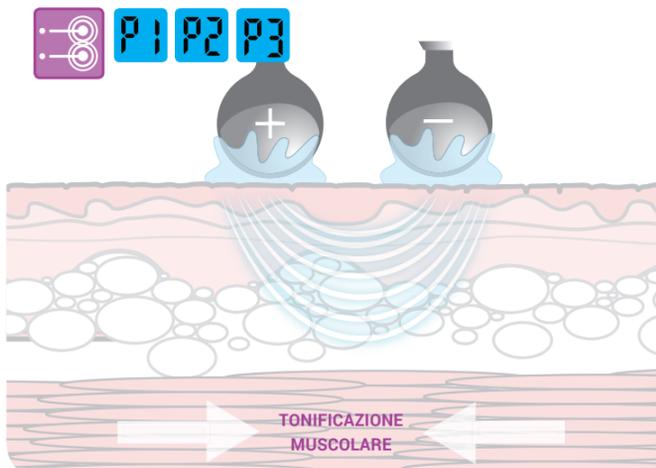

Praticata da oltre 40 anni nei saloni di bellezza, la tonificazione del viso con tecnologia faradica utilizza l'elettrostimolazione muscolare per contrarre e rilassare delicatamente i muscoli facciali, contribuendo a tonificare, rimodellare e rassodare. Questo tipo di stimolazione aumenta inoltre la circolazione localizzata, apportando maggiore ossigeno alle cellule cutanee e accelerando l'eliminazione delle tossine.

## TONIFICAZIONE CON TECNOLOGIA FARADICA

### REGIME DEL TRATTAMENTO

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di seguire il programma di tonificazione del viso con tecnologia faradica ogni giorno per le prime settimane, alternando quotidianamente i programmi 1, 2 e 3. Dopodiché, utilizzare quando serve per mantenere una buona tonicità.

### CHE COSA ASPETTARSI

All'inizio gli impulsi provocano una leggera sensazione di formicolio e, con il crescere dell'intensità, sarà possibile notare anche delle contrazioni muscolari.


• I denti potrebbero risultare leggermente sensibilizzati durante il trattamento: è perfettamente normale.

• La tonificazione e il rassodamento del viso dipendono dall'efficacia del leggero e delicato massaggio stimolante sui muscoli facciali. In caso di eventuale fastidio, aggiungere una quantità maggiore di gel conduttivo, ridurre l'intensità premendo il tasto (-) o rimuovere l'apparecchio dalla zona trattata.

• La fronte necessita di livelli di intensità maggiori. Premere il tasto (-) diverse volte prima di tornare all'area del viso.

### AREE DA TRATTARE

**Consiglio:** durante il trattamento, utilizzare uno specchio per agevolare il posizionamento.

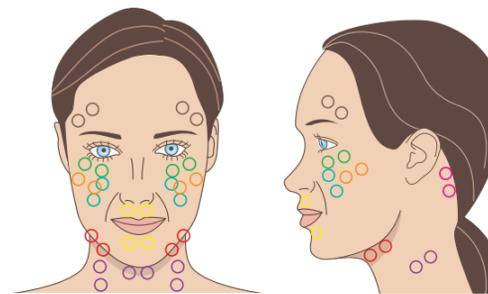


- FRONTE E ARCATA SOPRACCIGLIARE
- PARTE SOTTO L'OCCHIO
- GUANCE
- ZONA NASOLABIALE
- LABBRO INFERIORE
- LABBRO SUPERIORE
- MENTO
- COLLO
- ZONA DIETRO L'ORECCHIO



### FRONTE E ARCATA SOPRACCIGLIARE

Posizionare un contatto poco sopra l'estremità del sopracciglio, centrato tra il sopracciglio e l'attaccatura dei capelli. Inclinare l'apparecchio in modo tale che l'altro contatto si posizioni a metà tra il sopracciglio e l'attaccatura dei capelli.

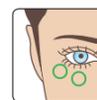

### PARTE SOTTO L'OCCHIO

Seguire la linea su cui la pelle delicata sotto l'occhio incontra l'osso zigomatico e posizionarvi un contatto direttamente sotto il centro dell'occhio. L'altro contatto deve seguire il contorno verso l'esterno.

## TONIFICAZIONE CON TECNOLOGIA FARADICA



### GUANCE

Appoggiare il contatto sotto lo zigomo, in modo che ne segua l'inclinazione in diagonale. È possibile che sia necessario regolare leggermente la posizione per trovare i punti di contatto migliori per la rispettiva forma del viso, consentendo l'intensità della contrazione senza troppo formicolio.



### ZONA NASOLABIALE

Le linee nasolabiali sono quelle tra il naso e gli angoli della bocca. Posizionare un contatto sulla rotondità della guancia e l'altro sotto in direzione diagonale, seguendo la linea naturale e parallelamente alle linee nasolabiali. Anche in questo caso è possibile che si debba regolare leggermente la posizione, finché non si ottiene il massimo della contrazione.



### LABBRO SUPERIORE E INFERIORE

Appoggiare i contatti in posizione simmetrica appena sopra il bordo del labbro. Ripetere l'operazione appena sotto il labbro inferiore. È normale che le labbra sembrino tirare in modo non uniforme da un lato.



### MENTO

Seguire la linea nasolabiale diagonalmente verso il basso e posizionare il contatto sul bordo della mascella in entrambi i lati. È possibile che sia necessario spostare leggermente il contatto.



### COLLO

Posizionare i contatti in linea sotto il lobo dell'orecchio. Per un posizionamento ottimale, tenere allineati i contatti ma fare scorrere leggermente l'apparecchio in avanti o indietro, finché non si ottiene il massimo della contrazione. Spostarsi verso il centro del collo appena sotto il profilo del mento.



### ZONA DIETRO L'ORECCHIO

Posizionare i contatti vicino all'attaccatura dei capelli il più in alto possibile, senza toccare le orecchie. In tal modo si può ottenere una contrazione molto intensa su tutto il collo.



### FASE 1

Applicare il gel conduttivo su ciascuno dei contatti a sfera: è necessaria una quantità generosa per garantire un buon contatto con la pelle.



### FASE 2

Premere il tasto Programma/On/Off per 3 secondi per accendere l'apparecchio. Una volta acceso, l'apparecchio emette un segnale acustico e il display LCD blu si illumina. L'apparecchio inizierà il programma 1. Premete ripetutamente il tasto Programma/On/Off per selezionare il programma desiderato. I programmi 1-3 sono trattamenti tonificanti faradici.

**Nota:** Ogni volta che si seleziona un diverso programma, il livello di intensità torna a 1will return to 1.



### FASE 3

Sulla pelle pulita, posizionare entrambi i contatti a sfera sulla prima area da trattare.



### FASE 4

Aumentare l'intensità premendo il tasto (+) e, se necessario, spostare la posizione dei contatti a sfera finché non si avvertono chiaramente delle contrazioni muscolari. Se la sensazione è fastidiosa, diminuire l'intensità premendo il tasto (-). Tenendo premuto i pulsanti (+) o (-) si scorre rapidamente tra i livelli di intensità. Ci sono 20 livelli di intensità. Il livello di intensità viene visualizzato sul display LCD.



### FASE 5

Tenere Lift Plus in posizione per 60 secondi. Dopo 60 secondi, l'apparecchio emette un segnale acustico per indicare che si dovrebbe passare alla successiva area da trattare.

**Importante:** Ridurre il livello di intensità prima di passare alla successiva area da trattare.



### FASE 6

Terminato l'uso, spegnere l'apparecchio premendo il tasto Programma/On/Off per 3 secondi. L'apparecchio emette un segnale acustico e poi si spegne.