

213923 – Bodi-Tek, Shape&Tone cintura tonificante per addominali

Avvertenze

- **Leggere con attenzione tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per eventuali necessità future.**

Da non utilizzarsi:

- Su aree cutanee affette da patologie quali rosacea, acne pustolosa, abrasioni cutanee, cute sensibile, oppure su zone su cui sono presenti cicatrici, nei o vene varicose.
- Nei seguenti casi: tumori benigni e maligni, emorragie, infiammazioni cutanee, ferite fresche o aperte, lividi o pelle screpolata.

- Se si ha un impianto elettronico (es. pacemaker).
- Vicino al cuore, attorno alla bocca o sulla pelle malata.
- In luoghi caratterizzati da elevata umidità quali il bagno.
- Mentre si dorme, si guida o nella vasca/doccia.
- Se si soffre di pressione sanguigna alta/bassa o altri problemi cardiaci.
- In caso di gravidanza.
- Sopra la zona addominale durante il ciclo mestruale.
- Da persone, bambini inclusi, con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o non esperte nell'uso dell'apparecchio, salvo che siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio dalla persona responsabile della loro sicurezza.

Ottenere l'autorizzazione del medico prima di utilizzare Ab Core Trainer se:

- Si è sofferito di malattie cardiache o malformazione cardiaca.
- Si ha un impianto ortopedico.
- Si soffre di epilessia, sclerosi multipla, flebite nella sua fase attiva (infiammazione di una vena), tessuto infiammato per malattia o infortunio o vene varicose in fase avanzata.
- Si è sofferito di un trauma acuto, fratture o si è in degenza postoperatoria.
- Si hanno parti del corpo tumefatte, infiammate o infortunate.
- Si soffre di diabete che colpisce la percezione sensoriale delle estremità. Qualora insorgano dubbi sull'utilizzo di Ab Core Trainer, per qualsiasi motivo, consultare il proprio medico prima dell'uso.

NON collocare Ab Core Trainer:

- Su pelle screpolata o dolorante, cicatrici, nei, aree infette o parti del corpo soggette a riduzione della sensibilità. In casi estremamente rari, l'area circostante gli elettrodi può essere

soggetta a fenomeni di irritazione cutanea. In presenza di tale fenomeno, si raccomanda di interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.

- Su oggetti metallici quali fibbie o gioielli.

Precauzioni


- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali.
- NON idoneo all'uso su o da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni.
- NON usare sotto l'influenza dell'alcol.
- NON usare mentre si guida o aziona un macchinario.
- NON toccare il lato conduttore del nastro durante il funzionamento.
- NON lasciar cadere, collocare oggetti pesanti sull'apparecchio o immergere in acqua.
- NON usare sostanze solventi o abrasive.
- Se il gel viene a contatto con gli occhi, risciacquare accuratamente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
- In caso di eventuale fastidio, per prima cosa ridurre l'intensità, se il fastidio persiste sospendere l'uso e contattare l'ufficio Assistenza Clienti.
- Se non si sa cosa stia causando il dolore, consultare sempre il medico e ottenere una diagnosi.
- Bodi-Tek non si assume alcuna responsabilità se non vengono seguite le direttive e le istruzioni fornite.

Cura generale

- NON immergere nell'acqua.
- Non lavare mai in lavatrice. Lavare il lato anteriore a mano con una spugna e acqua tiepida.
- Evitare il posizionamento in prossimità di sorgenti di calore eccessivo.
- Rimuovere la batteria dal controller, se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
- Utilizzare sempre batterie di tipo corretto (al litio 3V CR2032), e assicurarsi sempre che la batteria sia posizionata in modo corretto, con il "+" rivolto verso l'alto.

- NON smontare o riparare l'apparecchio. La riparazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da Bodi-Tek o da un distributore autorizzato.
- L'unità non include alcun componente che può essere riparato dall'utente. In caso di problemi nell'utilizzo dell'apparecchio, contattare il nostro Reparto di Assistenza Clienti.

Il tuo Ab Core Trainer

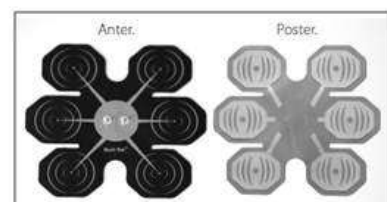

Bodi-Tek®