



Schema del prodotto


Vista anteriore

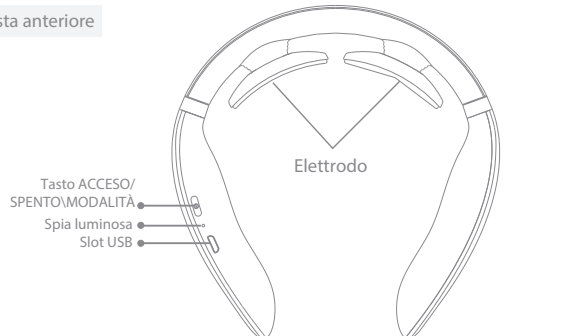

Vista posteriore

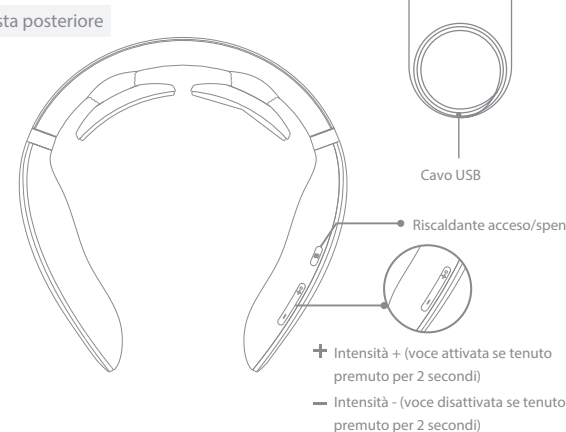

Come indossare

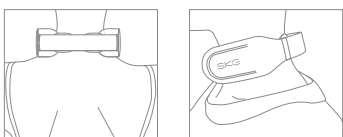

Funzionamento

- Quando la batteria del dispositivo è scarica, la spia del tasto di accensione passa dal blu al giallo, accompagnata da un messaggio vocale: "batteria scarica". A questo punto, è possibile ricaricare il dispositivo collegando il cavo USB ad un adattatore che soddisfi gli standard degli elettrodomestici (intervallo di uscita: CCSV 1-2A) o a una porta USB del computer. Durante la carica, la spia gialla lampeggia; quando il massaggiatore è completamente carico, la spia blu è sempre accesa. Sono necessarie circa 4 ore per caricare completamente il dispositivo, dopodiché il dispositivo può essere utilizzato per 3-4 ore.
- Prima dell'uso, inumidire prima la pelle del rachide cervicale con un asciugamano bagnato, quindi indossare il prodotto sul collo, in modo che l'elettrodo sia attaccato alla pelle del rachide cervicale. Quindi, regolare la posizione del prodotto, accendere il dispositivo e regolare l'intensità e la modalità di massaggio appropriate.
- Tenere premuto "⏻" per due secondi per accendere il dispositivo (con messaggio vocale: Ciao, SKG).
- Si avvia in "modalità smart" con il livello predefinito 0. Quando il dispositivo è acceso, ogni volta che si preme il tasto "⏻" si cambia in un ciclo di quattro modalità (con messaggio vocale quando la modalità viene cambiata: "Modalità Smart", "Modalità relax", "Modalità attiva" e "Modalità terapeutica"). Ogni volta che si cambia modalità, l'intensità ritorna al livello predefinito di 0. Quando il dispositivo è acceso, è possibile tenere premuto per due secondi per spegnere il dispositivo, accompagnato dal messaggio vocale "Ciao".
- "+" è il pulsante di aumento dell'intensità e il tasto Voce ACCESA. Per ogni pressione breve, la voce indica i livelli corrispondenti come "livello 1" e "livello 2" aumentando di un livello alla volta. L'intensità comprende 15 livelli (0, 1, 2 ... 15) . Premendo "+" quando l'intensità raggiunge 14, la voce indica: "max . ". Quindi premo di nuovo "+", la voce continua ad indicare "Max" con intensità invariata. Una pressione prolungata di "+" attiva la funzione vocale. Premere "+" per due secondi per attivare la voce e viene quindi dato il messaggio vocale "modalità audio".
- "-" è il pulsante per la riduzione dell'intensità e il tasto Voce SPENTA. Per ogni pressione breve, la voce indica i livelli corrispondenti come "livello 14" e "livello 13"

..... diminuendo di un livello alla volta. L'intensità comprende 15 livelli (15, 14, 13..... 0) . Premere "-" quando l'intensità raggiunge 1, la voce indica: "Min". Quindi premere di nuovo "-", la voce continua ad indicare "Min " con intensità invariata. Una pressione lunga "-" attiva la funzione vocale. Premere "-" per due secondi per disattivare la voce e viene emesso il messaggio vocale "modalità muto".

7. "⏻" è il pulsante di regolazione della funzione riscaldante. Premere una volta per avviare il riscaldamento, la voce indica: "Impacco caldo di basso livello". L'elettrodo viene riscaldato mantenendo la sua temperatura a 38±2°C; premere per due volte e il livello medio viene attivato quando viene dato il messaggio vocale "Calore medio" mentre la temperatura dell'elettrodo è mantenuta a 40±2°C; premere per tre volte e il livello alto viene attivato quando viene dato il messaggio vocale "Impacco caldo di alto livello", mentre l'elettrodo viene mantenuto a 42±2°C; premere di nuovo per spegnere il riscaldamento, il messaggio vocale indica: "Arresto la funzione riscaldante".

8. Quando il prodotto è indossato e utilizzato correttamente, la macchina principale è in uno stato di accensione; quando sia il riscaldamento che il massaggio non sono in funzione, il prodotto si spegnerà automaticamente in circa 120 secondi, mentre viene emesso il messaggio vocale "Ciao"; quando il prodotto non è indossato correttamente, si spegnerà automaticamente in circa 120 secondi, mentre viene dato il messaggio vocale "Ciao".

9. Se la batteria è troppo scarica, la macchina principale si spegne automaticamente mentre viene emesso il messaggio vocale "Ciao".

Consigli

- Si consiglia un massaggio adeguato al proprio stato fisico; si consiglia di utilizzare per non più di mezz'ora al giorno.
- Mettere da parte il dispositivo in un luogo ben ventilato e asciutto dopo l'uso.
- Non porre altri oggetti pesanti sul dispositivo.

Manutenzione ordinaria

- Durante la pulizia e la manutenzione del dispositivo, spegnerlo e pulire l'elettrodo con carta velina bagnata. Quando è particolarmente sporco, utilizzare una piccola quantità di alcool medico (concentrazione alcolica del 75%) per allargare le fessure e disinfettare.
- Durante la manutenzione quotidiana, utilizzare un detergente neutro e un panno morbido per pulire. Non utilizzare detergenti corrosivi e non immergere o risciacquare in acqua. Non lavare con acqua..
- Durante il processo di pulizia, evitare che acqua o altri liquidi entrino nel dispositivo per evitare cortocircuiti e scosse elettriche.

Domande Frequenti

- In caso di problemi con l'utilizzo del prodotto, fare riferimento ai seguenti suggerimenti e soluzioni.
- Se il prodotto è ancora guasto o non può essere utilizzato, spegnere l'alimentazione.
- Gli utenti non devono tentare di smontare o riparare il prodotto da soli. Lo smontaggio o la riparazione da soli causerà danni al prodotto e annullerà la garanzia del produttore. La società non sarà ritenuta responsabile per eventuali conseguenze causate da ciò.

Precauzioni

- Pericolo**
 - Non utilizzare mai il prodotto insieme ai seguenti dispositivi elettronici medici:
 - Pacemaker e altri dispositivi elettronici medici impiantabili.
 - Dispositivi elettronici medici come l'ECMO che sostengono la vita.
 - Elettrocardiografo e altri dispositivi elettronici medici.
 * Potrebbe causare il malfunzionamento di questi dispositivi elettronici medici, mettendo la persona in pericolo di vita.
 - Non è consentito l'uso nelle stazioni di servizio, officine con polvere eccessiva, gas e altri luoghi dove è presente del materiale infiammabile ed esplosivo.

Attenzione

- Quando l'apparecchiatura chirurgica ad alta frequenza e il massaggiatore vengono applicati contemporaneamente ad un paziente, l'elettrodo del massaggiatore può causare ustioni alla persona o danneggiare al massaggiatore.
- Quando il prodotto viene applicato vicino (1 metro) ad un dispositivo di trattamento a onde corte o microonde, l'uscita del massaggiatore potrebbe essere instabile.
- Durante il massaggio, non toccare ferite e cicatrici con l'elettrodo.
- Durante il massaggio, non posizionare l'elettrodo vicino al cuore. In caso contrario, aumenterà il rischio di fibrillazione cardiaca.
- Si consiglia l'utilizzo del prodotto da parte di un solo utente. Nel caso in cui venga utilizzato da due o più utenti, l'elettrodo deve essere pulito prima dell'uso.
- Quando si utilizza il prodotto, l'elettrodo deve essere ben aderente alla pelle con un contatto uniforme.
- L'elettrodo del massaggiatore ha una funzione di riscaldamento. L'impacco caldo posto sulla stessa parte del corpo per lungo tempo (più di 15 minuti) può causare

- ustioni da bassa temperatura.
- In caso di disagio durante o dopo l'uso, smettere di usare il prodotto e consultare un medico.
- Questo prodotto contiene una batteria al litio. Non smontare, modificare, immergere il prodotto o gettarlo nel fuoco, altrimenti potrebbe causare danni o esplosioni al prodotto.
- Consultare il proprio medico per le seguenti situazioni. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o disagi fisici.
 - Pazienti che stanno ricevendo cure mediche e non si sentono bene.
 - Pazienti affetti da condizioni cardiache anormali e ai nervi cerebrali.
 - Pazienti la cui temperatura supera i 38 gradi (febbre).
 - Pazienti affetti da malattie infettive.
 - Pazienti soggetti a disturbi percettivi cutanei o anomalie cutanee.
 - Pazienti in terapia.
 - Pazienti con pressione sanguigna anormale.
 - Pazienti che non possono esprimere la propria volontà in modo autonomo.
 - Pazienti affetti da disturbi sensoriali dovuti a disturbi della circolazione periferica causati da diabete, ecc.
 - Pazienti con allergie cutanee all'elettrodo in acciaio inossidabile .
- L'utilizzo è vietato nelle seguenti circostanze:
 - Pazienti con tumori maligni.
 - Pazienti con tendenza emorragica.
 - Donna incinta e in riposo post-parto.
 - Pazienti con infiammazione suppurativa acuta.
 - Portatori di pacemaker.
 - Pazienti con impianti metallici.
 - Vicino al cuore umano.
- Non applicare il prodotto in prossimità del cuore, sopra collo, testa, bocca, parti intime o parti con patologie cutanee e non massaggiare contemporaneamente la pianta dei piedi. Inoltre, non comprimere gli organi interni durante l'utilizzo. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o disagi fisici.
- Non usare con altri dispositivi medici o utilizzare più di due set di prodotto contemporaneamente. In caso contrario, potrebbe causare nausea o disagi fisici. Non usare per scopi diversi dal massaggio come descritto nel manuale dell'utente.
- In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti e malfunzionamenti.
- Non utilizzare l'elettrodo con superfici mancanti o danneggiate. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o malfunzionamenti.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto senza autorizzazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti o scosse elettriche.

- ustioni da bassa temperatura.
- In caso di disagio durante o dopo l'uso, smettere di usare il prodotto e consultare un medico.
- Questo prodotto contiene una batteria al litio. Non smontare, modificare, immergere il prodotto o gettarlo nel fuoco, altrimenti potrebbe causare danni o esplosioni al prodotto.
- Consultare il proprio medico per le seguenti situazioni. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o disagi fisici.
 - Pazienti che stanno ricevendo cure mediche e non si sentono bene.
 - Pazienti affetti da condizioni cardiache anormali e ai nervi cerebrali.
 - Pazienti la cui temperatura supera i 38 gradi (febbre).
 - Pazienti affetti da malattie infettive.
 - Pazienti soggetti a disturbi percettivi cutanei o anomalie cutanee.
 - Pazienti in terapia.
 - Pazienti con pressione sanguigna anormale.
 - Pazienti che non possono esprimere la propria volontà in modo autonomo.
 - Pazienti affetti da disturbi sensoriali dovuti a disturbi della circolazione periferica causati da diabete, ecc.
 - Pazienti con allergie cutanee all'elettrodo in acciaio inossidabile .
- L'utilizzo è vietato nelle seguenti circostanze:
 - Pazienti con tumori maligni.
 - Pazienti con tendenza emorragica.
 - Donna incinta e in riposo post-parto.
 - Pazienti con infiammazione suppurativa acuta.
 - Portatori di pacemaker.
 - Pazienti con impianti metallici.
 - Vicino al cuore umano.
- Non applicare il prodotto in prossimità del cuore, sopra collo, testa, bocca, parti intime o parti con patologie cutanee e non massaggiare contemporaneamente la pianta dei piedi. Inoltre, non comprimere gli organi interni durante l'utilizzo. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o disagi fisici.
- Non usare con altri dispositivi medici o utilizzare più di due set di prodotto contemporaneamente. In caso contrario, potrebbe causare nausea o disagi fisici. Non usare per scopi diversi dal massaggio come descritto nel manuale dell'utente.
- In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti e malfunzionamenti.
- Non utilizzare l'elettrodo con superfici mancanti o danneggiate. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o malfunzionamenti.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto senza autorizzazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti o scosse elettriche.

Parametri di base

Nome del prodotto	Massaggiatore per il collo	MK6E	K6E
Capacità della batteria	1000mAh	Potentia/operatività/ingresso	5W
Porta di carica	MicroUSB	Terminale di uscita/gomminale	5V

* Il codice di approvazione del modello del prodotto è presentato come "etichetta identificativa del prodotto con incisione laser".
Caricare il prodotto con l'adattatore di alimentazione appropriato con potenza nominale di 5W/5V==

- Durante il massaggio, per spostare l'elettrodo o posizionarlo su altre persone, assicurarsi di togliere l'alimentazione prima di spostarlo. Altrimenti si potrebbe ricevere una forte scossa elettrica.
- Non massaggiare assieme ad altre apparecchiature elettroniche. In caso contrario, potrebbe verificarsi il malfunzionamento dei dispositivi elettronici (come un orologio elettronico con una visualizzazione casuale).
- In caso di funzionamento anomalo, interrompere immediatamente l'alimentazione e rimuoverla. In caso contrario, potrebbero verificarsi temperature elevate o cortocircuiti, con conseguenti incidenti. Allo stesso tempo, contattare il servizio post-vendita.
- Non collegare o scollegare il cavo di ricarica USB con le mani bagnate. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica o un incidente.
- Non consentire l'uso a bambini o persone non in grado di esprimersi consapevolmente. In caso contrario, potrebbero verificarsi degli incidenti o del malessere fisico.
- Non utilizzare il prodotto in un luogo con elevata umidità, come un bagno, né utilizzare il prodotto durante il bagno. In caso contrario, si potrebbe ricevere una forte scossa elettrica e danneggiare il prodotto
- Non utilizzare il prodotto durante il sonno. In caso contrario, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente. Inoltre, l'elettrodo può essere spostato in altre parti e causare del disagio fisico.
- Non utilizzare il prodotto durante la guida. In caso contrario, potrebbe causare del disagio fisico a causa di una stimolazione eccessiva, con conseguenti incidenti.
- Non attaccare l'elettrodo all'area interessata per lungo tempo, altrimenti potrebbero verificarsi delle infiammazioni cutanee.
- Durante il massaggio, non toccare l'elettrodo con le parti metalliche della cintura, della collana, ecc. In caso contrario, si potrebbe ricevere una forte scossa elettrica.
- Non applicare il prodotto sulla stessa parte per lungo tempo (più di 30 minuti). In caso contrario, potrebbe verificarsi un affaticamento muscolare nella parte massaggiata e del disagio fisico.
- Indossare questo prodotto correttamente. Viene utilizzato sul rachide cervicale e viene indossato simmetricamente. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti o disagi fisici.
- Quando si scollega il cavo di carica USB dal prodotto, non tirare il cavo, ma afferrare la spina per estrarre. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o danni al prodotto.
- L'elettrodo del massaggiatore ha una funzione di riscaldamento. Gli utenti non sensibili al calore o particolarmente sensibili al calore devono consultare un medico prima dell'uso.
- Quando il prodotto è in uso per lungo tempo, la superficie sarà calda, il che è normale.

Nota

- In caso di disagio dovuto ad una anomalia del prodotto, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- In caso di una strana sensazione sul corpo o sulla pelle, consultare il medico e seguire i consigli del medico.

Consigli

- Assicurarsi che i pulsanti sul dispositivo funzionino normalmente prima dell'uso.
- Quando il dispositivo viene utilizzato per la prima volta o non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, caricarlo secondo il manuale d'uso per garantire che possa funzionare normalmente.
- Quando si smaltisce questo prodotto, smaltirlo secondo le normative di protezione ambientale locali. In caso contrario, potrebbe causare inquinamento ambientale.
- Gli utenti target di questo prodotto sono persone di età pari o superiore a 16 anni.
- Non utilizzare o mettere da parte questo prodotto nei seguenti luoghi:
 - Luoghi esposti alla luce diretta del sole.
 - Luoghi soggetti ad alta temperatura e umidità.
 - Luoghi con presenza di acqua.
 - Luoghi con eccessiva polvere.
 - Luoghi con fumo o fuoco.
 - Luoghi soggetti a vibrazioni.
 - Luoghi soggetti a forte elettromagnetismo.

Le batterie agli ioni di litio utilizzate in questo prodotto sono risorse riciclabili e preziose. Consegnarle a organizzazioni professionali che possono effettuare il riciclaggio delle batterie riciclabili quando vengono esaurite e scartate.

- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima dello smaltimento.
- L'apparecchio deve essere smontato prima della rimozione della batteria.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

Nota: utilizzare strumenti dedicati per rimuovere l'involucro di plastica sul lato senza tasti ed estrarre la batteria.

Problemi	Possibile causa/soluzione
Impossibile avviare	<ul style="list-style-type: none"> La batteria ricaricabile interna si sta scaricando. Verificare che l'interruttore di alimentazione del prodotto sia acceso.
Mancata carica o nessuna spia di carica	Verificare che il cavo USB e l'alimentatore del dispositivo e del telefono siano collegati.
Problemi	Possibile causa/soluzione
Display senza errori ma nessuna stimolazione	<ul style="list-style-type: none"> Il cuscinetto è a diretto contatto con la pelle? Regolare la posizione in modo che sia vicino alla pelle. Ci sono capelli o vestiti, gioielli, ecc. tra i cuscinetti e la pelle? Allontanarsi o rimuovere gli elementi sopraindicati. Il livello di intensità è troppo basso? Aumentare l'intensità del massaggio.
Sensazione di formicolio	<ul style="list-style-type: none"> L'elettrodo del massaggiatore e la pelle del collo sono a stretto contatto? Regolare la posizione in modo che aderisca alla pelle. Il tempo di massaggio è troppo lungo? Si consiglia di massaggiare per 15 minuti alla volta, due volte al giorno. L'intensità del massaggio è troppo alta? Regolare ad un livello basso. La pelle è allergica all'elettrodo? Coloro che hanno gravi allergie devono essere prima desensibilizzati. Il clima è freddo e la pelle secca? Utilizzare un asciugamano bagnato per inumidire l'area della pelle, prima dell'uso. La pelle presenta una ferita? Non posizionare gli elettrodi sulla ferita durante l'uso.
Stimolazione debole	<ul style="list-style-type: none"> L'elettrodo del massaggiatore è a buon contatto con l'area della pelle? Provare a regolare la posizione dell'elettrodo sulla superficie della pelle, per migliorare il contatto con la pelle e regolare l'intensità del massaggiatore. L'elettrodo è sporco o unto? Pulire la superficie dell'elettrodo. La batteria è scarica? Caricare se la batteria è scarica. Il livello di intensità del massaggio è troppo basso? Aumentare l'intensità del massaggio.

Nota per lo smaltimento del prodotto

Effettuare il riciclaggio della batteria ricaricabile (batteria agli ioni di litio).

! Pericolo

La batteria utilizzata per questo prodotto è una batteria ricaricabile dedicata. Non usare su altri prodotti. Non caricare la batteria estratta.

- Non gettare nel fuoco e surriscaldare.
- Non forare con un chiodo o altri oggetti appuntiti, non urtare o smontare.
- Non cortocircuitare la batteria con il metallo.
- Non mettere da parte con una collana o una forcina.
- Non caricare, utilizzare e posizionare la batteria nel fuoco, sotto il sole o in altri luoghi ad alta temperatura.

Tutte le situazioni di cui sopra possono causare riscaldamento, incendio e rotture.

Posizionare la batteria ricaricabile rimossa fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli per evitare che la ingeriscano.

- In caso di ingestione accidentale, contattare immediatamente a un medico.
- Non toccare il liquido che fuoriesce dalla batteria e maneggiarlo nel modo qui sotto descritto.
- Quando il liquido della batteria entra a contatto con gli occhi, diviene pericoloso in quanto può causare cecità. Non strofinare direttamente gli occhi con le mani, invece, lavarli immediatamente con acqua e contattare un medico per il trattamento. Quando il liquido della batteria viene a contatto con il corpo o gli indumenti, può causare irritazioni alla pelle o lesioni. Lavare con acqua e se il disagio fisico persiste, è necessario rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Smontare solo quando il prodotto viene smaltito. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti quali incendi, scosse elettriche o lesioni. In caso di riparazione (ad eccezione della sostituzione della batteria), consultare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

! Warning

FCC §15.19 Requisiti di etichettatura. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alla condizione che questo dispositivo non causi interferenze dannose.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato § 15.21 Informazioni per l'utente. Eventuali variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera uso e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

CE Questo dispositivo è stato testato per le tipiche operazioni che vengono effettuate quando indossato al corpo. Per rispettare i requisiti di esposizione alle radiofrequenze, è necessario mantenere una distanza minima di separazione di 0 cm tra il corpo dell'utente e il ricevitore, inclusa l'antenna. Clip per cintura, fondine e accessori simili di terze parti utilizzati con questo dispositivo non devono contenere componenti metallici. Gli accessori indossati sul corpo che non soddisfano questi requisiti potrebbero non essere conformi ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze e dovrebbero essere evitati. Utilizzare solo l'antenna in dotazione o un'antenna approvata.

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE. Tutte le suite di test radio essenziali sono state eseguite. ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI

Dichiarazione di conformità UE:
SKG Health Technology Co., Ltd. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Una copia della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile online all'indirizzo <https://www.skg.com/pages/skg-declara-tion-of-conformity>.

Dichiarazione di conformità del Regno Unito:
SKG Health Technology Co., Ltd. dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) del 2017.

Una copia della Dichiarazione di Conformità del Regno Unito è disponibile online all'indirizzo <https://www.skg.com/pages/skg-declara-tion-of-conformity>.

CE I vecchi apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti residui domestici, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento presso il punto di raccolta comunale tramite privati è gratuito. Il proprietario di vecchi apparecchi è responsabile nel portare gli apparecchi a questi punti di raccolta o punti di raccolta simili. Con questo piccolo sforzo personale, contribuirai quindi al riciclaggio di materie prime preziose e al trattamento delle sostanze tossiche.

Se provi disagio o irritazione della pelle quando indossi il tuo smartwatch, ti consigliamo di provare a pulire il tuo irritante. A volte residui o materiali estranei si accumulano attorno al dispositivo e possono irritare la pelle. È anche possibile che tu non indossi correttamente l'orologio. Ti consigliamo di assicurarti di pulire e regolare regolarmente l'orologio per una vestibilità più confortevole.

Avvertenza:
- Se si verifica irritazione della pelle quando si indossa l'orologio, astenersi dall'indossarlo e attendere due o tre giorni per vedere se i sintomi si attenuano. Se i sintomi persistono o peggiorano, consultare un medico.
- Se soffri di eczema, allergie o asma, potresti avere maggiori probabilità di provare irritazione o allergia della pelle da un dispositivo indossabile.

Precauzioni IC
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza della Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

* L'apparecchio deve essere alimentato esclusivamente a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
* Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza se sono sotto la supervisione di un adulto o tutore o sono state istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso tutti i pericoli relativi.
* I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
* La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione da parte di un adulto o tutore.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. L'apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio. Non esporre l'apparecchio o la batteria a temperature eccessive. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è esaurita, l'apparecchio deve essere smaltito correttamente. L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono prestare attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.