

GLO24K

UNLEASH THE POWER OF GOLD

GLO24K Neck & Face Massager+
(USB charged)
Item No.: BD2

GLO24K Masseur cou & visage +
(USB charge)
Article n°: BD2

GLO24K Hals - und gesichtsmassage
(Stromladen auf USB)
Projekt nummer eins.: BD2

GLO24K Massaggiatore per il collo e il viso +
(chiavetta USB)
Voce n.: BD2

GLO24K Masajecuello y cara +
(con carga USB)
Item n.º: BD2



TO MAXIMIZE RESULTS SCAN HERE


For more information about the product please visit
WWW.GLO24K.COM

Dist. by Y&E Ent., LLC

Atlanta, GA 30338 USA

71-75 Shelton Street, London, UK

Hauptstrasse 22 Neugersdorf 02727, Germany

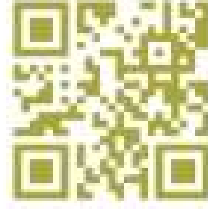

Important Reminder: Please charge to full before initial use and recharge between applications.
Rappel important: L'appareil doit être chargé complètement avant l'utilisation initiale et rechargé entre les applications.


Wichtige anmerkung: man sollte die elektrisität zum ersten mal voll aufladen und die batterie zwischen zwei benutzungen aufladen.

Información importante: cargarla bien en fondo antes del uso inicial y recargarla entre las aplicaciones.
Informazione importante: por favor, cargar a fondo antes de su uso inicial y recargar entre aplicaciones.

Allegato i



Istruzione delle tre modalità

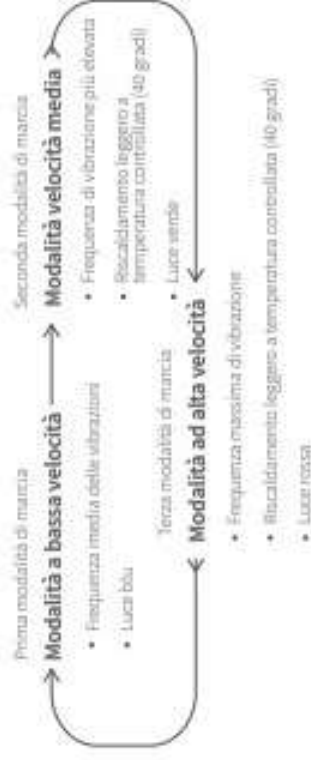

Brevetto



Appearance patent:
US D876,623 S



Appearance patent:
003539014-0001



Appearance patent:
30-0965355



Luce blu associata all' nutrimento della pelle e può contribuire all' aspetto cutaneo generale. Può anche aiutare a migliorare la consistenza e il tono della pelle.



Luce verde - associata a lenitivo e calmante la pelle e per equilibrarla.



Luce rossa - associata ad un aspetto più giovanile e può contribuire ad un aspetto cutaneo generale.


Caratteristiche del prodotto

Il prodotto è progettato ergonomicamente per essere applicato alla zona del collo e del viso. Usa una tecnologia che combina massaggi ad alta velocità, luce LED e riscaldamento della luce controllato dalla temperatura.

1. Il massaggio curvo della testa è specificamente progettato per il collo, il viso, le spalle e altre parti del corpo. La sua forma unica può contribuire a orientare la zona verso l'applicazione di questo prodotto.
2. La testa di massaggio può raggiungere i 40 gradi per generare un riscaldamento leggero e a temperatura controllata. Ha 3 modalità di velocità bassa, media e alta per corrispondere a 3 modalità/colori luci. Può stimolare la pelle per un'acnagione luminosa e brillante.
3. 3 modalità soniche/massaggio: bassa velocità (blu), media velocità (verde), alta velocità (rosso).
4. Funzione memoria in modalità con funzione promemoria di 60 secondi.
5. Comoda ricarica del cavo USB.
6. Piccoli, leggeri e portatili possono essere usati ovunque in qualsiasi momento
7. Progettazione moderna

Come usare sul collo

1. Applicare una piccola quantità di crema per la cura della pelle sull'area del collo (raccomandato). Massaggio fino al completo assorbimento.
2. Selezionare la modalità preferita (blu/verde/rosso) e applicare il massaggiatore sulla pelle con movimenti verso l'alto o verso il basso.
3. Usare il massaggiatore sulla parte posteriore e anteriore del collo. Massaggio tutti i punti di agopuntura con movimenti verso l'alto o verso il basso. Usare 5-10 minuti alla volta.

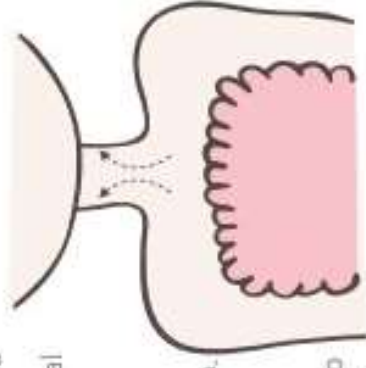

Come usare sul viso

1. Applicare una piccola quantità di crema per la cura della pelle sulla pelle pulita (raccomandato). Massaggio fino al completo assorbimento.
2. Selezionare la modalità preferita (blu/verde/rosso) e applicare il massaggiatore sulla pelle con movimenti verso l'alto o verso il basso.
3. Massaggi tutti i punti di agopuntura con movimenti verso l'alto o verso il basso intorno alla forma del viso. Usare 5-10 minuti alla volta.




Come pulire

1. Premi il pulsante ON/OFF per un secondo per spegnere il massaggiatore.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto.
3. Chiudere il coperchio protettivo e porlo in ambiente asciutto e ventilato.

Avvertenze e guide alla sicurezza

1. Leggere il manuale del prodotto prima dell'uso e conservarlo per l'uso futuro.
2. Utilizzare il cavo USB fornito nella scatola. Il tempo di ricarica dalla batteria scarica alla piena ricarica è di circa 2 ore.
3. Quando la batteria è scarica, lampeggia la luce rossa, quando la batteria è carica lampeggia la luce blu, quando la luce blu è accesa indica una carica completa.
4. Il prodotto ha la funzione memoria di modalità, quando lo accendete, entrerà automaticamente nella modalità scelta l'ultima volta.
5. Non utilizzare questo prodotto durante la carica.
6. Interrompere l'uso di questo prodotto se si sente a disagio o se si verifica irritazione o gonfiore della pelle e contattare il produttore.
7. Il prodotto non è impermeabile. Per favore, non metterlo in acqua.
8. Porre il prodotto in un luogo asciutto e ventilato per evitare la luce solare diretta e assicurarsi che non ci siano agenti chimici corrosivi.
9. I panni di pulizia essendo di un materiale in pile di alta qualità, può essere lavato ripetutamente.
10. Promemoria amichevole: usare prodotti per la cura della pelle moderati. Un eccessivo prodotto per la cura della pelle non può essere assorbito completamente. Al contrario, il residuo potrebbe permeare il massaggiatore e danneggiarlo. Pulire il massaggiatore in tempo con un panno di pulizia dopo l'uso.
11. Dopo un lungo periodo di inattività, il massaggiatore avrà bisogno di circa 15 minuti di ricarica per riattivarsi (l'indicatore luminoso diventerà blu).
12. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere fuori dall' portata di persone con ridotte capacità fisiche e mentali.
13. Non applicare direttamente sugli occhi.
14. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini piccoli ed è destinato esclusivamente ad uso esterno. Se ha qualsiasi condizione medica (ad esempio, ma non solo: ha un pacemaker cardiaco, soffre di epilessia, gravidanza, soffre di gravi condizioni mediche, ecc.) consulti il medico prima di usare questo prodotto.
15. Nel raro caso in cui si senta a disagio o la pelle diventi irritata, smetta di usare il prodotto e contatti il produttore.

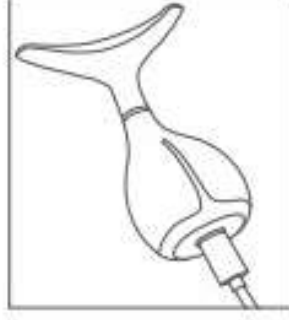

All'inizio della ricarica



Il prodotto ha bisogno di 15 minuti per essere in condizioni di carica

Politica della garanzia: GLO24K giustifica tutti i suoi strumenti estetici. Per ulteriori dettagli consultare il sito web.

Q&A

domanda

Il prodotto improvvisamente non ha vibrazioni, non funziona, qual è la ragione?

- Verificare se il prodotto manca o meno di elettricità. Prodotto di ricarica.
- Controllare se il prodotto comincia correttamente.
- Riavviare il prodotto dopo averlo spento.
- Contattare il GLO24K per consultare il produttore.

Risposta

Posso usare questo prodotto ogni giorno?

- Sì, si può usare il prodotto ogni giorno. 5-10 minuti per applicazione.