



To Maximize Your Results Scan Here
For more information about the device
please visit WWW.GLO24K.COM

EN, DE, FR, IT, ES

GLO24K
UNLEASH THE POWER OF GOLD



Skin Rejuvenation Beauty Device
User Manual

To Maximize Your Results Go to Back Side

Dispositivo estetico di ringiovanimento cutaneo

Manuale utente

Per massimizzare i vostri risultati andate indietro

L' apparecchio di bellezza per il ringiovanimento cutaneo è un apparecchio avanzato di bellezza a azione tripla che mira a generare un aspetto più giovanile ea contribuire a ringiovanire e abbellire l'

La pelle, per una carnagione più luminosa e brillante. Questo strumento di bellezza si basa su tecnologie all' avanguardia a LED rosso, a temperatura controllata, a riscaldamento dolce ea vibrazioni che aiutano a rivitalizzare, rilanciare e ringiovanire la pelle per un aspetto senza macchia, brillante e giovanile. Godetevi dell' Godetevi un'esperienza Spa a casa.

Azione tripla

- LED
- Riscaldamento leggero a temperatura controllata (40c)
- Vibrazioni.

Ricorda:

1. Carica completamente il dispositivo prima dell' uso.
2. Ricarica il device se non è usato per lungo tempo.
3. Il tempo di piena carica è di circa 2-3 ore.
4. Lo spegnimento automatico è impostato a 15 minuti per motivi di sicurezza.
5. Non usare su pelle irritata.




Caratteristiche del prodotto

Ringiovanimento cutaneo a LED



Il LED (diodo a emissione luminosa) è una tecnologia comunemente utilizzata nell' industria della bellezza e i suoi benefici sono associati ad un aspetto più giovane e radiante.³

Stimola il ringiovanimento cutaneo

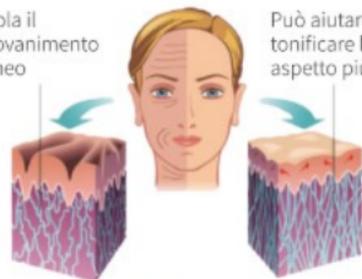

Può aiutare a bilanciare e tonificare la pelle per un aspetto più radiante



Riscaldamento della luce e vibrazioni controllati dalla temperatura.

L' apparecchio di bellezza di ringiovanimento cutaneo, oltre al LED, utilizza un riscaldamento della luce a temperatura controllata e tecnologie di vibrazione/massaggio entrambe associate a benefici per la cura della pelle per un aspetto più bello e vivificato.



Il dispositivo



Puoi caricare questo dispositivo direttamente sul fondo del dispositivo o usare la base.

USO



1. Pulisca il viso, rimuova il trucco e applichi il dispositivo solo sulla pelle asciutta e pulita



2. Premere un pulsante, accendere il dispositivo, il dispositivo entrerà in modalità standby (luce blu).



3. Premere il pulsante B per avviare le funzioni di riscaldamento, vibrazione e LED. La luce rossa mostrerà. Una volta in contatto con la pelle, queste funzioni sono attivate e la testa del dispositivo si riscalda gradualmente.



4. Massaggiare delicatamente la faccia scivolando il dispositivo sopra le aree di preoccupazione nei movimenti alti/bassi e circolari. L'uso raccomandato è 10-15 minuti per ciascuna applicazione 2-3 volte alla settimana.



5. Premi il pulsante B per passare alla modalità standby.



6. Per spegnere il dispositivo premere il pulsante A poco tempo (pressione non lunga). Per ottenere i migliori risultati, applicare una crema idratante dopo ogni applicazione del dispositivo.

Consigli: i metodi di cura di cui sopra possono essere adattati alle vostre esigenze.

Note e consigli di sicurezza

1. L' uso di questo prodotto è raccomandato solo per gli adulti. Tienilo lontano dai bambini.
2. Pulire con un panno asciutto dopo ogni uso. Non lavare o usare prodotti chimici detergenti. Questo dispositivo non è resistente all' acqua o impermeabile.
3. Questo dispositivo utilizza un " sensore tattile " sensibile al tatto. Funziona solo quando la testa del massaggio è in contatto diretto con la pelle e il dispositivo è acceso.
4. Evitare di mantenere il dispositivo su un' area cutanea troppo lunga e continuare a muoverlo sulla pelle con movimenti circolari verso l' alto o verso il basso.
5. Chiudere gli occhi durante l' applicazione per evitare fastidio.
6. Non applicare questo dispositivo direttamente sugli occhi. È destinato ad essere applicato sulla pelle del viso, del collo e del contorno occhi.
7. Usare come necessario. Ogni domanda fino a 10-15 minuti. Si raccomanda 2-3 volte alla settimana.
8. In rari casi di fastidio o sensibilità, interrompere l' uso di questo dispositivo e contattare il produttore.
9. Se ha una qualsiasi condizione medica (ad esempio, ma non solo : ha uno stimolatore cardiaco, epilessia, gravidanza, soffre di gravi condizioni mediche, ecc.), consulti il medico prima di usare questo prodotto.

Allegato i

Modello n.: BD1 Materiale: ABS+ acciaio inossidabile

Dimensione: 200*46.5*29.5mm Peso netto: 240g

Capacità batteria: 1200mAh Tensione d' esercizio: 7.4V

Lavoro corrente: <1 . 5A Temperatura termica: 40c+/- 1c

Uso del tempo: 10-15minuti/ tempo Lo spegnimento automatico è attivato a 15 minuti per motivi di sicurezza

Carica: indicatore luminoso lampeggiante durante la carica, luce blu a piena carica.

* nota: questo dispositivo è impostato per uno spegnimento automatico a 15 minuti per ragioni di sicurezza.

* il tempo di carica può richiedere circa 2-3 ore quando la batteria è scarica.

* le luci lampeggianti accese indicano una batteria scarica. Il dispositivo non può accendersi quando la batteria è scarica. Ricarica tra ogni utilizzo.

Accessori per Proudt: Dispositivo di bellezza infrarosso*1, Base tariffaria*1, Cavo USB*1, Manuale utente*1, Tessuto detergente*1, Busta*1

Riparazione e manutenzione

Per pulire il dispositivo, assicurati che sia spento e scollegato. Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto tra gli usi.

Questo strumento non è impermeabile all' acqua né resistente all' acqua. Non lavarla con acqua o con altri liquidi.

Mettere il dispositivo in un luogo sicuro dopo l' uso. Non mettere oggetti pesanti su di esso. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto per evitare l' umidità.

Dispositivo di ricarica tra gli usi.

Se il device presenta un guasto, seguire gli step sottostant. Se il problema non è risolto, contattare il centro servizi del prodotto. Non smontare il dispositivo.

| Manutenzione dei guasti | Motivo della guasto | Misura della guasto |
|--|--|---|
| Nessun dispositivo o terapia leggera agisce sulla pelle | Assicurati che il dispositivo sia acceso. Assicurarsi che il dispositivo tocchi la pelle | Riregola il gesto per toccare la pelle |
| Il dispositivo lampeggia e non può accendersi o non funziona | La batteria è esaurita | Prova a ricaricare, il tempo di ricarica è di circa 2-3 ore |
| Le luci del dispositivo si stanno spegnendo | il dispositivo deve essere riavviato | Spegni il dispositivo. Aspetta qualche minuto. Ricarica. Accendi di nuovo |
| Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 15 minuti | Lo spegnimento automatico è impostato a 15 minuti per motivi di sicurezza | Aspetti qualche minuto e giri indietro il dispositivo |

WWW.GLO24K.COM

Dist. by Y&E Ent., LLC

Atlanta, GA 30338 USA

71-75 Shelton Street, London, UK
Hauptstrasse 22 Neugersdorf 02727,
Germany

Garanzia : GLO24k per tutti i suoi strumenti estetici. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web.

