

GLO24K

UNLEASH THE POWER OF GOLD

7 Color LED Beauty Mask



User Manual

Please Read This Manual Carefully Before Using

Maschera di bellezza LED a colori

Manuale utente

Legga attentamente questo manuale prima di usarlo

DIREZIONI

1. Pulisci la faccia.
2. (Raccomandato). Applica i tuoi prodotti preferiti per la cura del viso (preferibilmente GLO24K).
3. Premi il pulsante ON/OFF per 3 secondi per accendersi.
4. Fai clic su/giù per selezionare la luce LED desiderata.
5. Posizionare la maschera sul viso per un massimo di 10 minuti. Puoi cambiare le luci durante l' applicazione facendo clic sul pulsante.
6. Per spegnere premere il pulsante ON/ Off per 3 secondi.
7. Usare come necessario ma mantenere ogni applicazione fino a 10 minuti (il timer automatico è impostato per 10 minuti per ogni uso).
8. Non usare durante la ricarica.

NOTE E AVVERTENZE

1. L' uso di questo prodotto è raccomandato solo per gli adulti.
2. La maschera è progettata per distribuire uniformemente le luci sul viso senza effetti indesiderati.
3. Il circuito all' interno del prodotto non deve essere pressato o piegato e deve essere posto piatto per proteggere il prodotto dopo l' uso quotidiano.
4. L'uso della maschera dopo l'applicazione di skincare (preferibilmente GLO24K) deve migliorare i risultati.
5. Usare come necessario. Ciascuna applicazione per un massimo di 10 minuti.
6. Nel raro caso di disagio o sensibilità, interrompere l'uso di questa maschera e contattare il produttore.
7. Durante la ricarica, la luce rossa accanto alla porta di ricarica indica che la maschera viene caricata. Quando la luce rossa è spenta, la maschera è completamente carica. Il prodotto si carica anche quando la porta USB non entra completamente nella porta USB e sarà pieno in 3 ore di carica.
8. Se ha una qualsiasi condizione medica (ad esempio, ma non solo: ha uno stimolatore cardiaco, epilessia, gravidanza, soffre di gravi condizioni mediche, ecc.) consulti il medico prima di usare questo prodotto.
9. Tenere fuori dalla portata dei bambini e persone con ridotte capacità fisiche e/o mentali.
10. Tenere lontano dall'acqua
11. non usare su pelle irritata
12. evitare/ridurre l'esposizione degli occhi. Si consiglia di chiuderli durante l'utilizzo.

BENEFICI PRODOTTI

Questa maschera usa diversi colori/toni chiari, ciascuno associati a benefici per la cura della pelle, che possono essere di aiuto miglioramento delle condizioni generali e dell'aspetto cutaneo. È facile da usare, portatile, leggero, trasparente, ricaricabile, sia per gli uomini che per le donne.


FUNZIONI

Luce rossa (620-650nm)	Antinvecchiamento/può contribuire all' aspetto cutaneo complessivo.
Luce blu (450-480nm)	Associato al nutrimento cutaneo per un aspetto radiante.
Luce verde (525-550nm)	Associato a un effetto lenitivo aspetto più energetico.
Luce gialla (565-580nm)	Può aiutare a tonificare la pelle per una carnagione luminescente.
Luce viola (400-430nm)	Associato all' equilibrio cutaneo per un migliore aspetto cutaneo complessivo.
Luce blu chiaro (490-525nm)	Associato a bilanciamento e calmatura della pelle per un aspetto giovanile visibile.
Luce brillante (Laser) (430-450nm)	Può contribuire all' aspetto cutaneo complessivo.

SPECIFICHE

Nome prodotto	Maschera di bellezza LED a colori
Dimensioni del prodotto	195*165*125mm
Peso del prodotto	76g
Materiali	ABS
Tensione di uscita	5V / 1A
Accessori	Maschera, manuale, linea del cavo
Alimentazione elettrica	Batteria ricaricabile
Tempo di ricarica	2 ore

ASPETTO DEL PRODOTTO

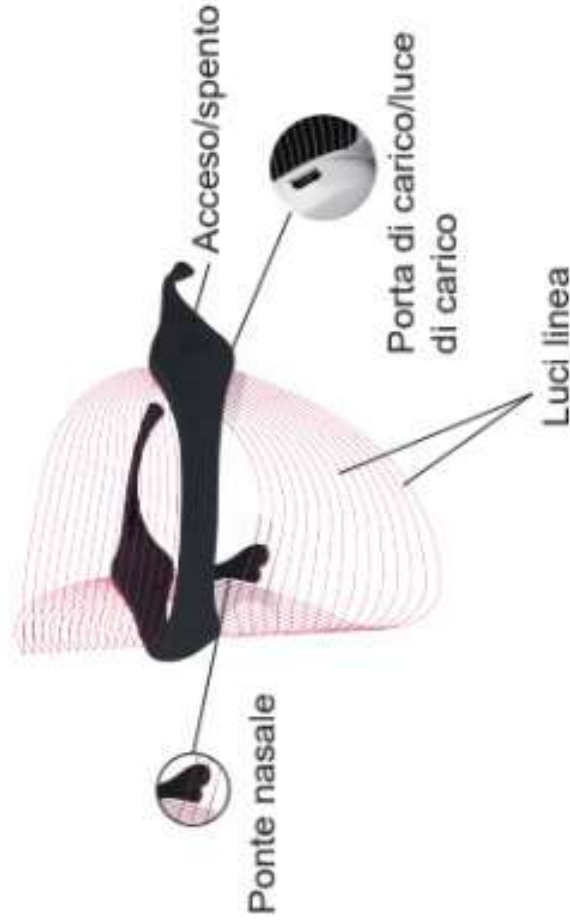

MANUTENZIONE

1. Pulire con un panno asciutto dopo ogni uso. Non lavare, la maschera non è resistente all'acqua né impermeabile.
2. Spegni prima di pulire questa maschera.
3. Scollegare sempre il prodotto dopo l'uso e non smontare il prodotto.

Nota: la maschera si carica anche se la testa del caricabatterie non entra completamente nella porta di ricarica e sarà caricata per intero in 3 ore.

STOCCAGGIO

1. Conservare questo prodotto in un luogo fresco e asciutto, evitando umidità e luce solare diretta o conservarla nella scatola.
2. Non immergere il prodotto in acqua o liquido.
3. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Disturb	Azione per problemi
La luce non è molto brillante	Carica la maschera
Questioni tariffarie	Cambia la spina/usb
La luce lampeggia	Carica la maschera
Altri	Contact Customer care

Garanzia: GLO24K garantisce tutti i suoi strumenti estetici. Controlla il sito web per dettagli.

GLO24K

UNLEASH THE POWER OF GOLD

7 Color LED Beauty Mask



TO MAXIMIZE RESULTS SCAN HERE
For more information about the device please visit

WWW.GLO24K.COM

Dist. by Y&E Ent., LLC

Atlanta, GA 30338 USA

71-75 Shelton Street, London, UK

Hauptstrasse 22 Neugersdorf 02727 Germany