

SPECIFICHE TECNICHE

INGRESSO ALIMENTAZIONE

== 5V 200mA Max



LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SEGUENTI PRIMA DI PROCEDERE ALL'USO E CONSERVARE QUESTA DOCUMENTAZIONE PER UN EVENTUALE UTILIZZO FUTURO.



QUESTO PRODOTTO È PROGETTATO SOLO PER UN UTILIZZO INTERNO.



IL PRODOTTO È CONFORME ALLE ATTUALI NORMATIVE UE SUI PRODOTTI DI QUESTO TIPO.



MANTENERE IN UN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO.

SMALTIMENTO



La direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per favorire il riciclo dei prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclo, al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente, di trattare adeguatamente le sostanze tossiche e di evitare il proliferare di discariche.

Il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica. Pertanto si raccomanda di assicurarsi che, al termine del suo ciclo di vita, il prodotto venga smaltito nel modo corretto, in conformità ai requisiti delle autorità locali. Il prodotto NON deve essere smaltito come normale rifiuto domestico.

Come riciclare in modo responsabile

1. Controllare i regolamenti comunali locali
2. Separare i componenti e smaltirli correttamente

ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi domanda, inviare una email all'indirizzo:
online@riobeauty.com

GARANZIA

Per registrare la garanzia di due anni online visitare il sito:
www.riobeauty.com/warranty_online.htm



RP REGNO UNITO: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inghilterra GL53 7ET

RP UE: Il gruppo Dezac (Europa) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Paesi Bassi

© The Dezac Group Ltd 2022, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inghilterra GL53 7ET.

www.riobeauty.com

1-IN-DCWU-I/1,2

SMILE WHITE ADVANCED BLUE-LIGHT TEETH WHITENING



 the beauty specialists

PRECAUZIONI


- Deve essere utilizzato solo da adulti.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- NON ingerire.
- NON utilizzare durante trattamenti ortodontici.
- NON usare in stato di gravidanza
- Evitare il contatto del gel sbiancante con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua.
- Consigliamo un massimo di due trattamenti di 15 minuti al giorno; non eccedere o abusare.
- In presenza di recessione gengivale, altri tipi di disturbo alle gengive, ipoplasia dentale

PRECAUZIONI

o altre patologie legate alla fragilità dello smalto, o infezione dentale, consultare il proprio dentista prima di procedere con il trattamento. Non consigliamo l'uso in presenza di gengiviti, ulcere orali o di qualsiasi tipo di ferita alla bocca.


- In caso di aumento della sensibilità o di irritazioni a denti o gengive, interrompere l'uso e consultare il proprio dentista. Si consiglia di informare il proprio dentista se ci si sta sottoponendo a un trattamento sbiancante.
- Per motivi di igiene, la mascherina è destinata all'uso da parte di una singola persona.
- NON smontare questo prodotto in quanto non contiene componenti soggette a manutenzione da parte dell'utente. In caso di guasto, restituire a Rio o al servizio di assistenza relativo.
- Il trattamento Teeth Whitening non è efficace su denti artificiali, compresi ponti, capsule, corone, faccette, protesi o otturazioni.
- NON usare mentre si dorme.
- In presenza di un evidente accumulo di placca o tartaro sui denti, si consiglia di effettuare una pulizia dentale professionale prima di iniziare il trattamento.
- In presenza di macchie bianche o fluorosi, le zone in oggetto potrebbero essere evidenziate nei primi giorni dopo l'uso di questo trattamento cosmetico. Ciò è normale e non deve destare preoccupazioni.

UTILIZZO

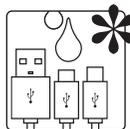


Prima di ogni utilizzo lavare la mascherina con acqua calda saponata.


Importante: assicurarsi che i connettori USB NON si bagnino.

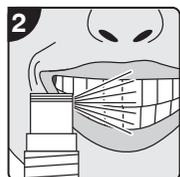

Spruzzare uno strato sottile di Advanced Whitening Pre-Treatment Spray (soluzione pre-trattamento spray) sulla parte frontale dei denti.

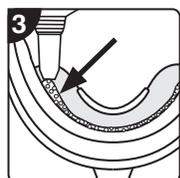


Applicare una sottile linea di whitening gel (gel sbiancante) all'interno della parte superiore e inferiore della mascherina e applicare direttamente alla parte frontale dei denti.

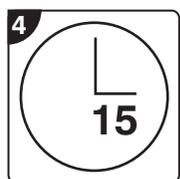

Collegare a una fonte di alimentazione USB (telefono, adattatore o computer).
Lasciare agire per 15 minuti.
Per ottenere risultati ottimali, è possibile ripetere il trattamento fino a 2 volte al giorno.

Dopo l'utilizzo scollegare dalla fonte di alimentazione.

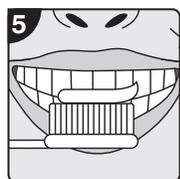

Sciagquare la bocca e lavare i denti.

Evitare di mangiare o bere per almeno 30 minuti dopo il trattamento.

Per ottenere risultati ottimali, è possibile ripetere il trattamento fino a 2 volte al giorno.

DOPO L'USO



Lavare la mascherina con acqua saponata calda.
Asciugarla prima di metterla via.