

Tesmed+

Cellulite Smooth

Brevettato



Manuale d'uso



Made in Italy





PRIMI UTILIZZI

- ☁ Pressione leggera
- 🕒 Circa 1 minuto per zona nei 5-7 giorni
- 🌸 Un lieve arrossamento è normale
- 🟦 È possibile la comparsa di lividi
- ⬇️ Ridurre la pressione in caso di fastidio
- 👉 Il trattamento deve essere graduale e confortevole


MODALITÀ DI UTILIZZO

📅 **Periodo di adattamento iniziale**

Nei primi giorni iniziare con circa 1 minuto al giorno per zona trattata, applicando una pressione molto leggera. Aumentare gradualmente durata e intensità nei giorni successivi in base alla sensibilità personale.


Cosce

- 3-5 minuti per coscia
- 1 o 2 volte al giorno
- Far scorrere il massaggiatore con movimenti regolari in entrambe le direzioni

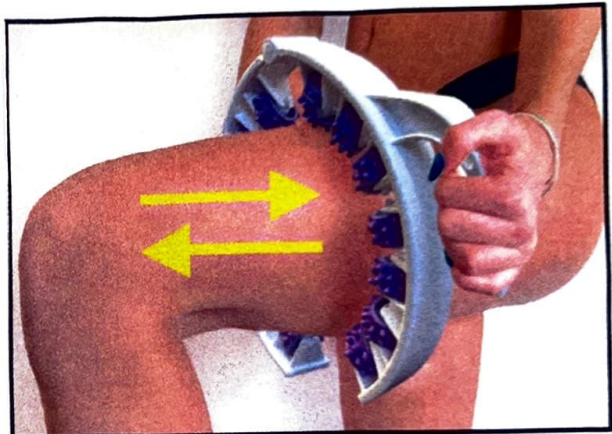

Glutei

- 3-5 minuti
- 1 o 2 volte al giorno
- Applicare una pressione leggera
- Il trattamento può essere effettuato anche con l'aiuto di un'altra persona

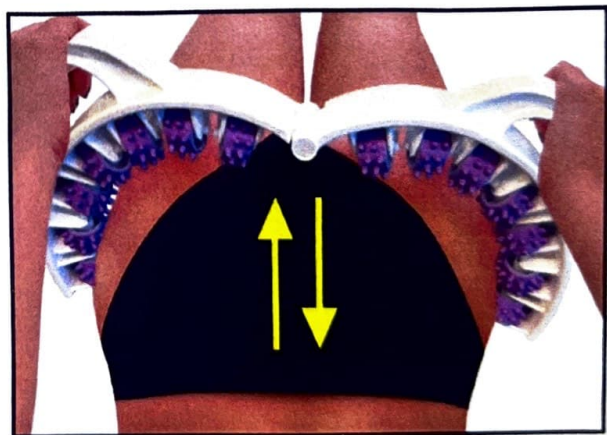

TESMED CELLULITE SMOOTH

Tesmed Cellulite Smooth è un massaggiatore manuale brevettato, progettato per migliorare l'aspetto delle imperfezioni della cellulite. La sua struttura consente di trattare ampie aree come cosce e glutei in pochi minuti al giorno. Un utilizzo regolare può aiutare a rendere la pelle più liscia e compatta, migliorandone visivamente l'aspetto.

INDICAZIONI

✓ Migliorare l'aspetto della pelle nelle zone soggette a cellulite:

- cosce
- glutei
- fianchi

CONTROINDICAZIONI

Il massaggio con Tesmed Cellulite Smooth non è consigliato nei soggetti:

- con neoplasie in corso o recenti (ultimi 5 anni)
- sottoposti a terapie anticoagulanti
- con gravi problematiche cardiovascolari
- con capillari fragili nelle zone da trattare
- con disturbi cutanei o sistemici (eczema, psoriasi, acne grave, flebiti, vene varicose, angiomi)
- con micro o macronoduli percepibili al tatto

Inoltre:

- durante la gravidanza
- in presenza di ferite, abrasioni, cicatrici o pelle non integra

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo per cui è stato progettato
- Evitare utilizzi impropri o eccessivi
- Il prodotto non sostituisce trattamenti professionali
- Non destinato all'uso su minori
- Uso personale; si consiglia di non dividerlo
- Tenere fuori dalla portata dei bambini

PRECAUZIONI D'USO

- Non consigliato in caso di capillari fragili
- Su pelle sensibile possono comparire lievi arrossamenti o piccoli lividi
- Una pressione leggera e regolare è sufficiente
- Sospendere temporaneamente l'uso in caso di lividi diffusi o fastidi persistenti
- Un lieve arrossamento dopo il trattamento è normale e temporaneo
- Utilizzare solo su pelle pulita e asciutta
- In caso di pelle delicata è possibile applicare una crema prima del trattamento

COSA ASPETTARSI DAL TRATTAMENTO

Normale

- lieve arrossamento
- sensazione di calore

In caso di dolore o lividi estesi e persistenti, sospendere l'utilizzo. Riprovare quando i lividi si saranno attenuati, applicando una pressione più leggera e riducendo la durata delle sedute.

NOTA IMPORTANTE

 I risultati possono variare da persona a persona in base a fattori individuali come stile di vita, alimentazione e costanza d'uso.

TECNOLOGIA TESMED CELLULITE SMOOTH

Il dispositivo si ispira alle tecniche di massaggio manuale. I rulli combinano due azioni:

- **Rulli convergenti:** sollevano e stimolano delicatamente la pelle
- **Rulli divergenti:** distendono la superficie cutanea favorendo un aspetto più liscio

La forma ergonomica consente di trattare ampie aree in modo semplice e rapido.

BENEFICI



Un utilizzo regolare può aiutare a:

- ridurre la visibilità delle imperfezioni della cellulite
- migliorare il tono e l'aspetto della pelle
- offrire una piacevole sensazione di leggerezza

MANUTENZIONE E PULIZIA

Lavare con acqua e sapone neutro dopo l'uso

Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto secondo le normative locali vigenti sui rifiuti plastici.

GARANZIA E ASSISTENZA

Conservare la prova d'acquisto

Per acquisti online è sufficiente la conferma d'ordine o di spedizione

info@tesmed.com

SIMBOLI

	Indica il codice commerciale del prodotto
	Indica il fabbricante del prodotto
	Data di fabbricazione nel formato anno, mese, giorno
	Lotto di produzione

CONTATTI

Per segnalazioni di sicurezza o reclami: info@tesmed.com
www.tesmed.it



Produttore / Responsabile UE
Manufacturer & EU Responsible Person :
Feldi S.r.l. - Italia
info@tesmed.com




Via Perugino, 10 - 24068 Seriate (BG) Italy

info@tesmed.com

www.tesmed.com

REF.: CELLULITE SMOOTH

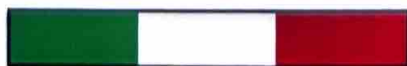

Made in Italy