



SmoothSkin Bare+


- 1 Rimuovi i peli visibili dall'area di trattamento.

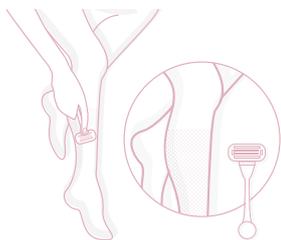

- 2 Collega il dispositivo per accenderlo.

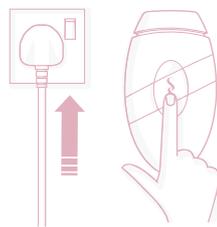


- 3 Premi saldamente il dispositivo contro la pelle: gli indicatori si illumineranno di bianco.

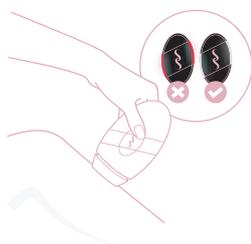

- 4 Premi il pulsante di attivazione: il dispositivo lampeggerà (avvertirai una sensazione di calore).




- 5 Modalità glide: per aree più grandi come le gambe, sposta il dispositivo lungo l'area con un movimento costante e ripeti.

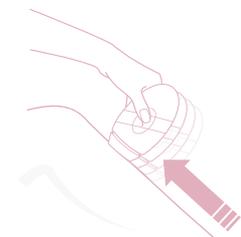


- 6 Modalità stamp: per le aree più piccole come le ascelle, premi il dispositivo sull'area di trattamento, lascia lampeggiare, rimuovi dalla pelle e passa all'area successiva.



- 7 Quando termini il trattamento, scollega il dispositivo.

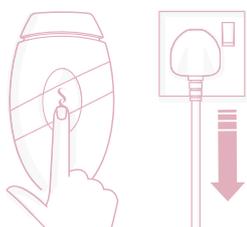

- 8 Esegui il trattamento una volta alla settimana per 12 settimane, ripeti se necessario.

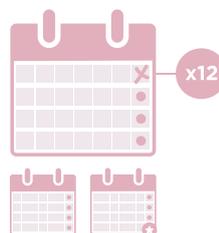

AVVERTENZE

Le persone con determinate condizioni mediche o della pelle non devono utilizzare i nostri dispositivi. Prima dell'uso, leggere il manuale d'uso completo. In caso di dubbio consultare il proprio medico.

