

THANK YOU FOR JOINING  
THE LUCENT FAMILY


Running low on your whitening supplies? No worries!

Refilling your home teeth whitening kit is just a click away.


Visit our website for a hassle-free restock of your whitening essentials.

Keeping your smile bright has never been easier!

Happy whitening!

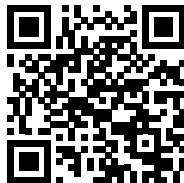

BE  
LUCENT

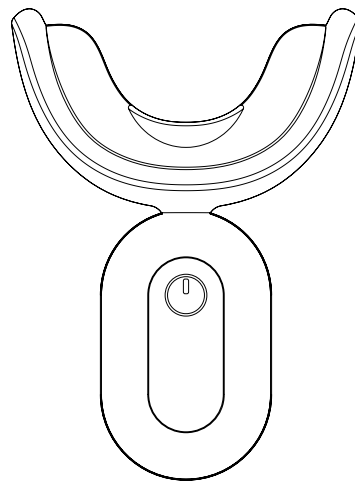

STELLAR

Gentle Teeth Whitening Kit

Welcome to a brighter,  
more confident smile!

[www.be-lucent.com](http://www.be-lucent.com)  
[info@be-lucent.com](mailto:info@be-lucent.com)  
[@be\\_lucent\\_now](https://www.instagram.com/be_lucent_now)


We're thrilled to have you embark on this journey with us. At Be Lucent, we believe that everyone deserves to shine, starting with a radiant smile. That's why we've crafted this home teeth whitening kit with you in mind - to make professional-level dental care accessible right from the comfort of your home.

Our passion is to innovate and enhance everyday dental routines, transforming them into something extraordinary. With a blend of cutting-edge technology and the finest ingredients, we create products that are not only effective but also safe and easy to use. This kit is a testament to our commitment to excellence, designed to help you achieve visible results while prioritizing the health of your teeth and gums.

Whether you're preparing for a special occasion or simply want to add a spark to your daily life, our teeth whitening kit is the perfect companion to take your dental routine to the next level. Let's embark on this journey towards a dazzling smile together!

Thank you for choosing us to be a part of your smile journey.


## OVERVIEW

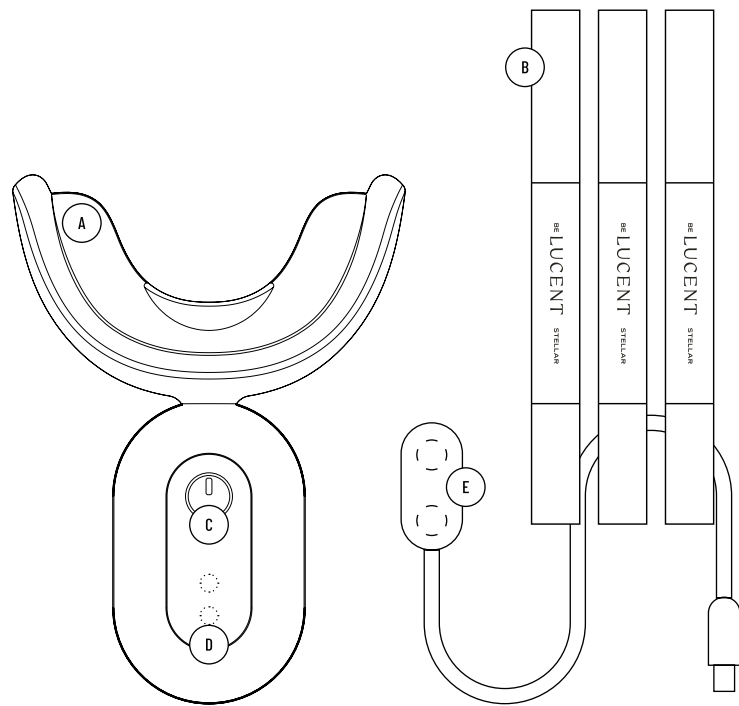

1 Brush your teeth and dry them with a tissue



2 Apply gel on the teeth evenly, avoid the gums

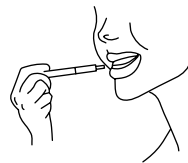

3 Put the activator in your mouth and bite on it gently



4 Press the power button for 20 minutes treatment



5 Rinse the mouth thoroughly with water



6 Rinse the mouth tray after each use



## STELLAR

Gentle Teeth Whitening Kit

Smile Brighter!

# STELLAR

## Gentle Teeth Whitening Kit

|                            |             |       |
|----------------------------|-------------|-------|
| INSTRUCTIONS OF USE        | ENGLISH     | 2-3   |
| HANDBUCH                   | DEUTSCH     | 4-5   |
| INSTRUCTIONS D'UTILISATION | FRANÇAIS    | 6-7   |
| MANUAL DE USARIO           | ESPAÑOL     | 8-9   |
| ISTRUZIONI D'USO           | ITALIANO    | 10-11 |
| GEBRUIKSAANWIJZINGEN       | NEDERLANDS  | 12-13 |
| INSTRUKCJA UŻYCIA          | POLSKI      | 14-15 |
| BRUKSANVISNING             | SVENSKA     | 16-17 |
| BRUGSANVISNING             | DANSK       | 18-19 |
| BRUGSANVISNING             | NORSK       | 20-21 |
| KÄYTTÖOHJEET               | SOUMALAINEN | 22-23 |

## Overview

- A. LED lights in blue and red
- B. Tubes of PAP+ whitening gel
- C. Touch button
- D. Charging with magnetic connection
- E. Magnetic charging cable

## INCI

Glycerin, Aqua, Phthalimidoperoxycaproic Acid, PVP, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Potassium Hydroxide, Potassium Citrate, Hydroxyapatite, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Mica, CI 77891, Saccharin Sodium, Proctone Olamine

## Introduction

### Thank you for buying the Stellar whitening kit.

The whitening kit includes the PAP+ gel, which cleans and whitens the teeth. But it's also gentle on the gum and mouth. The formula is also developed to support the strengthening of the teeth after treatment.

The activator is equipped with LED lights, using blue and red light, with the wavelength between 480-520 nm. This activates the gel and the process cleans the teeth from stains and marks and turns yellow teeth whiter.

### Important notes

The first time you might want to use only 10 minutes to get used to the process.

Try to avoid smoking and drinking coffee, tea or red wine for the following hours after treatment. The teeth are more sensitive to discoloring right after the treatment.

## Precautions

The whitening process does not work on artificial teeth nor teeth that are damaged.

The whitening kit should not be used by pregnant and breastfeeding women nor children under 16 years

The silicon rail on the activator is waterproof and should be cleaned under tap water. But the main body of the activator is not waterproof and must not be immersed under water.

Do not pour boiling water on the silicon rail, as it might damage the shape.

Avoid any contact with the eyes.

The saliva produced during the whitening process is ok to swallow.

If you would experie irritation or swollen gum, please discontinue the program and contact a dentist.

Do not use the whitening kit while sleeping.

Keep the kit away for children under 3 years old.

Do not try to detach, deform nor repair the device yourself.

## Quick guide

The whitening process should be repeated for about 7 days. Some people need a few more days to reach the desired whitening effect.

Refill packs are available at [be-lucent.com](http://be-lucent.com)

### 1. Prepare your teeth

Brush your teeth to make sure they are clean. Then dry your teeth with a tissue or towel.

### 2. Apply the gel

Unscrew the lid of the teeth whitening gel. Rotate the bottom of the tube clockwise until the gel flows into the brush. Then paint the gel onto your teeth. Add extra gel on yellow teeth. Avoid putting gel on the gums.

### 3. Prepare the whitening activator

Place the mouth tray into your mouth and bite gently. Find the best fit for your teeth. Then press the button to turn the light on.

### 4. Use the whitening activator

The process runs for 20 minutes and will automatically turn off when it's done. The light will also pause for half a second after 10 minutes to inform about half-time.

### 5. Rinse in water

Rinse your mouth with water after taking the activator out. Clean the mouth tray under tap water.

## One year limited warranty

All Be Lucent products are designed and manufactured to meet high expectations and to provide the best customer experience. However, sometimes, products may have malfunctions due to manufacturing defects. That is why we offer a full one year warranty from the date of original purchase, which covers defects in materials and workmanship.

The replacement warranty is valid only if the original receipt issued to the customer, specifying the date of purchase, is presented with the product to be replaced.

If you believe this product is defective, carefully repack the unit and return the product to your authorized seller within the warranty period, with the original receipt. Your authorized seller will replace the product, provided a defect in materials or workmanship is identified.

This limited replacement warranty does not apply in cases of abuse or misuse of the product, use contrary to the Lucent instructions, ordinary wear and tear, incorrect connection, force majeure or unauthorized repair.

## Überblick

- A. LED-Leuchten in Blau und Rot
- B. Tuben mit PAP+-Bleaching-Gel
- C. Touch-Taste
- D. Laden mit magnetischer Verbindung
- E. Magnetisches Ladekabel

## INCI

Glycerin, Aqua, Phthalimidoperoxycaproic Acid, PVP, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Potassium Hydroxide, Potassium Citrate, Hydroxyapatite, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Mica, CI 77891, Saccharin Sodium, Piroctone Olamine

## Einführung

**Vielen Dank, dass Sie sich für das Stellar-Bleaching-Kit entschieden haben.**

Das Bleaching-Set enthält das PAP+-Gel, das die Zähne reinigt und aufhellt. Es schont aber auch Zahnfleisch und Mund. Die Formel wurde auch entwickelt, um die Stärkung der Zähne nach der Behandlung zu unterstützen. Der Aktivator ist mit LED-Leuchten ausgestattet, die blaues und rotes Licht mit einer Wellenlänge zwischen 480 und 520 nm verwenden. Dadurch wird das Gel aktiviert und der Prozess reinigt die Zähne von Flecken und Markierungen und macht gelbe Zähne weißer.

## Wichtige notizen

Beim ersten Mal sollten Sie sich vielleicht nur 10 Minuten Zeit nehmen, um sich an den Vorgang zu gewöhnen. Vermeiden Sie in den folgenden Stunden nach der Behandlung das Rauchen und das Trinken von Kaffee, Tee oder Rotwein. Direkt nach der Behandlung reagieren die Zähne empfindlicher auf Verfärbungen.

## Vorsichtsmaßnahmen

Der Bleaching-Prozess funktioniert weder bei künstlichen Zähnen noch bei beschädigten Zähnen.

Das Bleaching-Set sollte nicht von schwangeren und stillenden Frauen sowie Kindern unter 16 Jahren verwendet werden

Die Silikonschiene am Aktivator ist wasserdicht und sollte unter Leitungswasser gereinigt werden. Der Hauptkörper des Aktivators ist jedoch nicht wasserdicht und darf nicht unter Wasser getaucht werden. Gießen Sie kein kochendes Wasser auf die Silikonschiene, da dies die Form beschädigen könnte. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Augen.

Der beim Aufhellungsprozess produzierte Speichel kann problemlos geschluckt werden. Sollten bei Ihnen Reizungen oder geschwollenes Zahnfleisch auftreten, brechen Sie das Programm bitte ab und wenden Sie sich an einen Zahnarzt.

Verwenden Sie das Bleaching-Set nicht während des Schlafens. Bewahren Sie das Kit für Kinder unter 3 Jahren auf.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu lösen, zu verformen oder zu reparieren.

## Kurzanleitung

Der Aufhellungsprozess sollte etwa 7 Tage lang wiederholt werden. Manche Menschen benötigen noch ein paar Tage, um den gewünschten Aufhellungseffekt zu erreichen.

Nachfüllpackungen sind erhältlich unter **be-lucent.com**

### 1. Bereiten Sie Ihre Zähne vor

Putzen Sie Ihre Zähne, um sicherzustellen, dass sie sauber sind. Anschließend trocknen Sie Ihre Zähne mit einem Taschentuch oder Handtuch.

### 2. Tragen Sie das Gel auf

Schrauben Sie den Deckel des Zahnaufhellungsgels ab. Drehen Sie den Boden des Röhrchens im Uhrzeigersinn, bis das Gel in den Pinsel fließt. Tragen Sie dann das Gel auf Ihre Zähne auf. Fügen Sie bei gelben Zähnen zusätzliches Gel hinzu. Vermeiden Sie es, Gel auf das Zahnfleisch aufzutragen.

### 3. Bereiten Sie den Aufhellungsaktivator vor

Legen Sie die Mundschiene in Ihren Mund und beißen Sie sanft zu. Finden Sie die beste Lösung für Ihre Zähne. Drücken Sie dann die Taste, um das Licht einzuschalten.

### 4. Verwenden Sie den Aufhellungsaktivator

Der Vorgang dauert 20 Minuten und wird automatisch beendet, wenn er abgeschlossen ist. Außerdem pausiert das Licht nach 10 Minuten für eine halbe Sekunde, um über die Halbzeitpause zu informieren.

### 5. Mit Wasser abspülen

Spülen Sie Ihren Mund mit Wasser aus, nachdem Sie den Aktivator herausgenommen haben. Reinigen Sie die Mundschiene unter Leitungswasser.

## Ein Jahr eingeschränkte Garantie

Alle Produkte von Be Lucent werden entwickelt und hergestellt, um hohe Erwartungen zu erfüllen und das beste Kundenerlebnis zu bieten. Manchmal kann es jedoch aufgrund von Herstellungsfehlern zu Fehlfunktionen bei Produkten kommen. Aus diesem Grund bieten wir eine volle einjährige Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt. Die Ersatzgarantie ist nur gültig, wenn dem Kunden die dem Kunden ausgestellte Originalquittung mit Angabe des Kaufdatums dem auszutauschenden Produkt vorgelegt wird.

Wenn Sie glauben, dass dieses Produkt defekt ist, verpacken Sie das Gerät sorgfältig neu und senden Sie das Produkt innerhalb der Garantiezeit mit der Originalquittung an Ihren autorisierten Verkäufer zurück. Ihr autorisierter Verkäufer wird das Produkt ersetzen, sofern ein Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt wird.

Diese eingeschränkte Ersatzgarantie gilt nicht in Fällen von Missbrauch oder Missbrauch des Produkts, Verwendung entgegen den Lucent-Anweisungen, normaler Abnutzung, falschem Anschluss, höherer Gewalt oder unbefugter Reparatur.

## Aperçu

- A. Les voyants LED s'allument en bleu et en rouge
- B. Tubes de gel blanchissant PAP+
- C. Bouton tactile
- D. Chargement avec connexion magnétique
- E. Câble de chargement magnétique

## INCI

Glycerin, Aqua, Phthalimidoperoxycaproic Acid, PVP, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Potassium Hydroxide, Potassium Citrate, Hydroxyapatite, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Mica, CI 77891, Saccharin Sodium, Piroctone Olamine

## Introduction

### Merci d'avoir acheté le kit de blanchiment Stellar.

Le kit de blanchiment comprend le gel PAP+, qui nettoie et blanchit les dents. Mais il est également doux pour les gencives et la bouche. La formule est également développée pour favoriser le renforcement des dents après le traitement.

L'activateur est équipé de lumières LED, utilisant une lumière bleue et rouge, d'une longueur d'onde comprise entre 480 et 520 nm. Cela active le gel et le processus nettoie les dents des taches et des marques et rend les dents jaunes plus blanches.

### Notes importantes

La première fois, vous souhaitez peut-être utiliser seulement 10 minutes pour vous habituer au processus. Essayez d'éviter de fumer et de boire du café, du thé ou du vin rouge pendant les heures qui suivent le traitement. Les dents sont plus sensibles à la décoloration juste après le traitement.

## Précautions

Le processus de blanchiment ne fonctionne pas sur les dents artificielles ni sur les dents endommagées.

Le kit de blanchiment ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes et allaitantes ni par les enfants de moins de 16 ans.

Le rail en silicone de l'activateur est étanche et doit être nettoyé sous l'eau du robinet. Mais le corps principal de l'activateur n'est pas étanche et ne doit pas être immergé sous l'eau.

Ne versez pas d'eau bouillante sur le rail en silicone, car cela pourrait endommager la forme.

Évitez tout contact avec les yeux.

La salive produite pendant le processus de blanchiment peut être avalée.

Si vous ressentez une irritation ou un gonflement des gencives, veuillez interrompre le programme et contacter un dentiste.

N'utilisez pas le kit de blanchiment pendant votre sommeil.

Conserver le kit hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

N'essayez pas de détacher, déformer ou réparer l'appareil vous-même.

## Guide Rapide

Le processus de blanchiment doit être répété pendant environ 7 jours. Certaines personnes ont besoin de quelques jours supplémentaires pour atteindre l'effet blanchissant souhaité.

Des recharges sont disponibles sur [be-lucent.com](http://be-lucent.com)

### 1. Préparez vos dents

Brossez-vous les dents pour vous assurer qu'elles sont propres. Séchez ensuite vos dents avec un mouchoir ou une serviette.

### 2. Appliquez le gel

Dévissez le couvercle du gel de blanchiment des dents. Faites pivoter le bas du tube dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le gel coule dans la brosse. Appliquez ensuite le gel sur vos dents. Ajoutez du gel supplémentaire sur les dents jaunes. Évitez de mettre du gel sur les gencives.

### 3. Préparez l'activateur de blanchiment

Placez le plateau buccal dans votre bouche et mordez doucement. Trouvez le meilleur ajustement pour vos dents. Appuyez ensuite sur le bouton pour allumer la lumière.

### 4. Utilisez l'activateur de blanchiment

Le processus dure 20 minutes et s'éteindra automatiquement une fois terminé. La lumière s'arrêtera également pendant une demi-seconde après 10 minutes pour informer de la mi-temps.

### 5. Rincer à l'eau

Rincez-vous la bouche avec de l'eau après avoir retiré l'activateur. Nettoyez le plateau buccal sous l'eau du robinet.

## Garantie limitée d'un an

Tous les produits Be Lucent sont conçus et fabriqués pour répondre à des attentes élevées et offrir la meilleure expérience client. Cependant, les produits peuvent parfois présenter des dysfonctionnements dus à des défauts de fabrication. C'est pourquoi nous offrons une garantie complète d'un an à compter de la date d'achat d'origine, qui couvre les défauts de matériaux et de fabrication.

La garantie de remplacement n'est valable que si le reçu original délivré au client, précisant la date d'achat, est présenté avec le produit à remplacer.

Si vous pensez que ce produit est défectueux, remballez soigneusement l'appareil et renvoyez le produit à votre vendeur agréé pendant la période de garantie, avec le reçu original. Votre vendeur agréé remplacera le produit, à condition qu'un défaut de matériaux ou de fabrication soit identifié.

Cette garantie limitée de remplacement ne s'applique pas en cas d'abus ou de mauvaise utilisation du produit, d'utilisation contraire aux instructions Lucent, d'usure normale, de connexion incorrecte, de force majeure ou de réparation non autorisée.

## Descripción general

- A. Luces LED en azul y rojo.
- B. Tubos de gel blanqueador PAP+
- C. Botón táctil
- D. Carga con conexión magnética
- E. Cable de carga magnético

## INCI

Glycerin, Aqua, Phthalimidoperoxycaproic Acid, PVP, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Potassium Hydroxide, Potassium Citrate, Hydroxyapatite, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Mica, CI 77891, Saccharin Sodium, Piroctone Olamine

## Introducción

### Gracias por comprar el kit de blanqueamiento Stellar.

El kit de blanqueamiento incluye el gel PAP+, que limpia y blanquea los dientes. Pero también es suave con las encías y la boca. La fórmula también está desarrollada para apoyar el fortalecimiento de los dientes después del tratamiento.

El activador está equipado con luces LED, que utilizan luz azul y roja, con una longitud de onda de entre 480 y 520 nm. Esto activa el gel y el proceso limpia los dientes de manchas y marcas y vuelve los dientes amarillos más blancos.

### Notas importantes

La primera vez quizás quieras utilizar sólo 10 minutos para acostumbrarte al proceso.

Trate de evitar fumar y beber café, té o vino tinto durante las siguientes horas después del tratamiento.

Los dientes son más sensibles a la decoloración inmediatamente después del tratamiento.

## Precauciones

El proceso de blanqueamiento no funciona en dientes artificiales ni en dientes dañados.

El kit de blanqueamiento no debe ser utilizado por mujeres embarazadas y en período de lactancia ni por niños menores de 16 años.

El riel de silicona del activador es resistente al agua y debe limpiarse con agua del grifo. Pero el cuerpo principal del activador no es resistente al agua y no debe sumergirse bajo el agua.

No vierta agua hirviendo sobre el riel de silicona, ya que podría dañar la forma.

Evite cualquier contacto con los ojos.

La saliva producida durante el proceso de blanqueamiento se puede tragar.

Si experimenta irritación o inflamación de las encías, suspenda el programa y comuníquese con un dentista.

No utilice el kit de blanqueamiento mientras duerme.

Mantenga el kit alejado de niños menores de 3 años.

No intente desmontar, deformar ni reparar el dispositivo usted mismo.

## Guía rápida

El proceso de blanqueamiento debe repetirse durante unos 7 días. Algunas personas necesitan unos días más para alcanzar el efecto blanqueador deseado.

Los paquetes de recarga están disponibles en [be-lucent.com](http://be-lucent.com)

### 1. Prepara tus dientes

Cepilla tus dientes para asegurarte de que estén limpios. Luego sécate los dientes con un pañuelo o toalla.

### 2. Aplicar el gel

Desenrosque la tapa del gel blanqueador de dientes. Gire la parte inferior del tubo en el sentido de las agujas del reloj hasta que el gel fluya hacia el cepillo. Luego pinta el gel sobre tus dientes. Agregue gel adicional sobre los dientes amarillos. Evite ponerse gel en las encías.

### 3. Prepara el activador blanqueador.

Coloque la bandeja bucal en su boca y muerda suavemente. Encuentre el mejor ajuste para sus dientes. Luego presione el botón para encender la luz.

### 4. Utiliza el activador blanqueador.

El proceso dura 20 minutos y se apagará automáticamente cuando finalice. La luz también se detendrá durante medio segundo después de 10 minutos para informar sobre el descanso.

### 5. Enjuague con agua

Enjuáguese la boca con agua después de quitarse el activador. Limpie la bandeja bucal con agua del grifo.

## Garantía limitada de un año

Todos los productos de Be Lucent están designados y autorizados para lograr un alto nivel de cumplimiento y para lograr los niveles más bajos. Men ibland kan produkter ha fel på grund av illverkningsfel. Det är förför vi erbjuder ett års garanti från det ursprungliga inköpsdatumet, som täcker defekter i material och utförande.

La garantía adicional es una garantía completa de los productos originales que se han actualizado hasta el momento, con angivande av inköpsdatum, uppvisas illsammans med produkten som ska ersättas.

Si el producto es defectuoso, se empaqueta o se devuelve y el producto se devuelve hasta que se vende por autorización en un período de garantía con el contrato original. Para comprar otros productos autorizados, asegúrese de identificar los materiales y los materiales.

Si no se cumple ninguna garantía de devolución si se produce un error o una infracción del producto, se solicita una instrucción de Lucent, un corte vanligt, una anulación fela, fuerza mayor o una reparación adicional.

## Panoramica

- A. Il LED si illumina in blu e rosso
- B. Tubi di gel sbiancante PAP+
- C. Pulsante touch
- D. Ricarica con connessione magnetica
- E. Cavo di ricarica magnetico

## INCI

Glycerin, Aqua, Phthalimidoperoxycaproic Acid, PVP, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Potassium Hydroxide, Potassium Citrate, Hydroxyapatite, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Mica, CI 77891, Saccharin Sodium, Piroctone Olamine

## Introduzione

### Grazie per aver acquistato il kit sbiancante Stellar.

Il kit sbiancante include il gel PAP+, che pulisce e sbianca i denti. Ma è anche delicato sulle gengive e sulla bocca. La formula è sviluppata anche per supportare il rafforzamento dei denti dopo il trattamento.

L'attivatore è dotato di luci LED, che utilizzano luce blu e rossa, con una lunghezza d'onda compresa tra 480 e 520 nm. Questo attiva il gel e il processo pulisce i denti da macchie e segni e rende i denti gialli più bianchi.

### Note importanti

La prima volta potresti voler utilizzare solo 10 minuti per abituarti al processo.

Cercare di evitare di fumare e di bere caffè, tè o vino rosso nelle ore successive al trattamento. I denti sono più sensibili allo scolorimento subito dopo il trattamento.

## Precauzioni

Il processo di sbiancamento non funziona sui denti artificiali né sui denti danneggiati.

Il kit sbiancante non deve essere utilizzato da donne incinte e che allattano né da bambini sotto i 16 anni

La guida in silicone sull'attivatore è impermeabile e deve essere pulita sotto l'acqua del rubinetto. Ma il corpo principale dell'attivatore non è impermeabile e non deve essere immerso sott'acqua.

Non versare acqua bollente sulla guida in silicone perché potrebbe danneggiarne la forma.

Evitare qualsiasi contatto con gli occhi.

La saliva prodotta durante il processo di sbiancamento può essere deglutita.

Se avverti irritazione o gengive gonfie, interrompi il programma e contattata un dentista.

Non utilizzare il kit sbiancante durante il sonno.

Tenere il kit lontano dai bambini di età inferiore a 3 anni.

Non tentare di staccare, deformare o riparare da soli il dispositivo.

## Guida veloce

Il processo di sbiancamento dovrebbe essere ripetuto per circa 7 giorni. Alcune persone hanno bisogno di qualche giorno in più per raggiungere l'effetto sbiancante desiderato.

I pacchetti di ricarica sono disponibili su [be-lucent.com](http://be-lucent.com)

### 1. Prepara i denti

Lavati i denti per assicurarti che siano puliti. Quindi asciuga i denti con un fazzoletto o un asciugamano.

### 2. Applicare il gel

Svitare il coperchio del gel sbiancante per i denti. Ruotare il fondo del tubo in senso orario finché il gel non scorre nello spazzolino. Quindi dipingi il gel sui denti. Aggiungi ulteriore gel sui denti gialli. Evitare di applicare il gel sulle gengive.

### 3. Preparare l'attivatore sbiancante

Metti il vassoio in bocca e mordilo delicatamente. Trova la soluzione migliore per i tuoi denti. Quindi premere il pulsante per accendere la luce.

### 4. Utilizzare l'attivatore sbiancante

Il processo dura 20 minuti e si spegnerà automaticamente al termine. La luce si fermerà anche per mezzo secondo dopo 10 minuti per informare dell'intervallo.

### 5. Sciacquare con acqua

Sciacquare la bocca con acqua dopo aver estratto l'attivatore. Pulisci il boccaglio sotto l'acqua del rubinetto.

## Garanzia limitata di un anno

Tutti i prodotti Be Lucent sono progettati e realizzati per soddisfare aspettative elevate e fornire la migliore esperienza al cliente. Tuttavia, a volte, i prodotti potrebbero presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di fabbricazione. Ecco perché offriamo una garanzia completa di un anno dalla data di acquisto originale, che copre i difetti di materiali e lavorazione.

La garanzia di sostituzione è valida solo se unitamente al prodotto da sostituire viene presentato lo scontrino fiscale originale rilasciato al cliente, specificante la data di acquisto.

Se si ritiene che questo prodotto sia difettoso, reimballare attentamente l'unità e restituire il prodotto al rivenditore autorizzato entro il periodo di garanzia, con la ricevuta originale. Il venditore autorizzato sostituirà il prodotto, a condizione che venga identificato un difetto nei materiali o nella lavorazione.

Questa garanzia di sostituzione limitata non si applica in caso di abuso o uso improprio del prodotto, uso contrario alle istruzioni Lucent, normale usura, collegamento errato, forza maggiore o riparazione non autorizzata.

## Overzicht

- A. LED-lampjes zijn blauw en rood
- B. Tubes PAP+ bleekgel
- C. Aanraakknop
- D. Opladen met magnetische aansluiting
- E. Magnetisch laadkabel

## INCI

Glycerin, Aqua, Phthalimidoperoxycaproic Acid, PVP, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Potassium Hydroxide, Potassium Citrate, Hydroxyapatite, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Mica, CI 77891, Saccharin Sodium, Piroctone Olamine

## Invoering

### Bedankt voor het kopen van de Stellar-bleekkit.

De whitening kit bevat de PAP+ gel, die de tanden reinigt en witter maakt. Maar het is ook zacht voor het tandvlees en de mond. De formule is tevens ontwikkeld om de versteviging van de tanden na de behandeling te ondersteunen.

De activator is uitgerust met LED-verlichting, die gebruik maakt van blauw en rood licht, met een golflengte tussen 480-520 nm. Dit activeert de gel en het proces reinigt de tanden van vlekken en vlekken en maakt gele tanden witter.

### Belangrijke aantekeningen

De eerste keer wilt u misschien slechts 10 minuten gebruiken om aan het proces te wennen.

Probeer de volgende uren na de behandeling het roken en het drinken van koffie, thee of rode wijn te vermijden. Direct na de behandeling zijn de tanden gevoeliger voor verkleuring.

## Voorzorgsmaatregelen

Het bleekproces werkt niet bij kunststanden en ook niet bij beschadigde tanden.

De bleekkit mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en door kinderen jonger dan 16 jaar

De siliconenrail op de activator is waterdicht en moet onder kraanwater worden gereinigd. Maar het hoofddeelte van de activator is niet waterdicht en mag niet onder water worden ondergedompeld.

Giet geen kokend water op de siliconenrail, omdat dit de vorm kan beschadigen.

Vermijd elk contact met de ogen.

Het speeksel dat tijdens het bleekproces wordt geproduceerd, is prima om door te slikken.

Als u irritatie of gezwollen tandvlees ervaart, stop dan met het programma en neem contact op met een tandarts.

Gebruik de bleekkit niet tijdens het slapen.

Houd de set buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.

Probeer het apparaat niet zelf los te maken, te vervormen of te repareren.

## Snelgids

Het bleekproces moet ongeveer 7 dagen worden herhaald. Sommige mensen hebben nog een paar dagen nodig om het gewenste bleekeffect te bereiken.

Navulverpakkingen zijn verkrijgbaar bij **be-lucent.com**

### 1. Bereid je tanden voor

Poets je tanden om er zeker van te zijn dat ze schoon zijn. Droog vervolgens uw tanden met een tissue of handdoek.

### 2. Breng de gel aan

Schroef het deksel van de tandenbleekgel los. Draai de onderkant van de tube met de klok mee totdat de gel in de borstel stroomt. Breng vervolgens de gel op je tanden aan. Voeg extra gel toe op gele tanden. Vermijd het aanbrengen van gel op het tandvlees.

### 3. Bereid de bleekactivator voor

Plaats het mondbakje in uw mond en bijt zachtjes. Vind de beste pasvorm voor uw tanden. Druk vervolgens op de knop om het licht aan te doen.

### 4. Gebruik de bleekactivator

Het proces duurt 20 minuten en wordt automatisch uitgeschakeld als het klaar is. Ook zal het licht na 10 minuten een halve seconde pauzeren om de rust aan te geven.

### 5. Spoel af met water

Spoel uw mond met water nadat u de activator eruit heeft gehaald. Maak het mondbakje schoon onder kraanwater.

## Eén jaar beperkte garantie

Alle producten van Be Lucent zijn ontworpen en vervaardigd om aan hoge verwachtingen te voldoen en de beste klantervaring te bieden. Soms kunnen producten echter defecten vertonen als gevolg van fabricagefouten. Daarom bieden wij een volledige garantie van één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, die materiaal- en fabricagefouten dekt.

De vervangingsgarantie is alleen geldig als het originele aankoopbewijs dat aan de klant is verstrekt en waarop de aankoopdatum is vermeld, wordt overlegd met het te vervangen product.

Als u denkt dat dit product defect is, pak het apparaat dan zorgvuldig opnieuw in en stuur het product binnen de garantieperiode terug naar uw geautoriseerde verkoper, met de originele aankoopbon. Uw geautoriseerde verkoper zal het product vervangen, op voorwaarde dat er een materiaal- of fabricagefout wordt vastgesteld.

Deze beperkte vervangingsgarantie is niet van toepassing in geval van misbruik of verkeerd gebruik van het product, gebruik in strijd met de instructies van Lucent, gewone slijtage, onjuiste aansluiting, overmacht of ongeoorloofde reparatie.

## Przegląd

- A. Diody LED w kolorze niebieskim i czerwonym
- B. Tubki żelu wybielającego PAP+
- C. Przycisk dotykowy
- D. Ładowanie za pomocą połączenia magnetycznego
- E. Magnetyczny kabel do ładowania

## INCI

Glycerin, Aqua, Phthalimidoperoxycaproic Acid, PVP, Ammonium Acryloyldimethylsulfate/VP Copolymer, Potassium Hydroxide, Potassium Citrate, Hydroxyapatite, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Mica, CI 77891, Saccharin Sodium, Piroctone Olamine

## Wstęp

### Dziękujemy za zakup zestawu wybielającego Stellar.

W zestawie do wybielania znajduje się żel PAP+, który czyści i wybiela zęby. Ale jest także delikatny dla dziąseł i jamy ustnej. Formuła została opracowana również tak, aby wspomagać wzmocnienie zębów po leczeniu.

Aktywator wyposażony jest w diody LED wykorzystujące światło niebieskie i czerwone o długości fali 480-520 nm. To aktywuje żel, a proces oczyszcza zęby z plam i śladów oraz sprawia, że żółte zęby stają się bielsze.

### Ważne Notatki

Za pierwszym razem możesz chcieć przeznaczyć tylko 10 minut na przyzwyczajenie się do procesu.

Staraj się unikać palenia i picia kawy, herbaty i czerwonego wina przez kolejne godziny po zabiegu. Zaraz po zabiegu zęby są bardziej wrażliwe na przebarwienia.

## Środki Ostrożności

Proces wybielania nie działa na zęby sztuczne ani zęby uszkodzone.

Zestawu wybielającego nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz dzieci poniżej 16 roku życia

Silikonowa szyna aktywatora jest wodoodporna i należy ją czyścić pod bieżącą wodą. Jednak główny korpus aktywatora nie jest wodoodporny i nie można go zanurzać pod wodą.

Nie polewaj silikonowej szyny wrzątkiem, gdyż może to spowodować uszkodzenie kształtu. Unikaj kontaktu z oczami.

Ślina powstająca podczas procesu wybielania jest w stanie przełknąć.

W przypadku wystąpienia podrażnienia lub obrzęku dziąseł należy przerwać program i skontaktować się ze stomatologiem.

Nie używaj zestawu wybielającego podczas snu.

Trzymaj zestaw z dala od dzieci poniżej 3 roku życia.

Nie próbuj samodzielnie odłączać, deformować ani naprawiać urządzenia.

## Szybka Porada

Proces wybielania należy powtarzać przez około 7 dni. Niektóre osoby potrzebują jeszcze kilku dni, aby osiągnąć pożądaną efekt wybielania.

Pakiety uzupełniające są dostępne pod adresem [be-lucent.com](http://be-lucent.com)

### 1. Przygotuj zęby

Umij zęby, aby upewnić się, że są czyste. Następnie osusz zęby chusteczką lub ręcznikiem.

### 2. Nałóż żel

Odkręć wieczko żelu do wybielania zębów. Obracaj dolną część tuby zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż żel spłynie do szczoteczki. Następnie nałóż żel na zęby. Dodaj dodatkowy żel na żółte zęby. Unikaj nakładania żelu na dziąsła.

### 3. Przygotuj aktywator wybielania

Umieść nakładkę na ustach w ustach i delikatnie gryź. Znajdź rozwiązanie najlepsze dla Twoich zębów. Następnie nacisnij przycisk, aby włączyć światło.

### 4. Użyj aktywatora wybielania

Proces trwa 20 minut i po zakończeniu zostanie automatycznie wyłączony. Światło zgaśnie również na pół sekundy po 10 minutach, aby poinformować o przerwie.

### 5. Wypłucz w wodzie

Po wyjściu aktywatora wypłucz usta wodą. Wyczyść tackę na usta pod wodą z kranu.

## Roczna Ograniczona Gwarancja

Wszystkie produkty Be Lucent są projektowane i produkowane tak, aby spełniać wysokie oczekiwania i zapewniać klientom jak najlepsze doświadczenia. Czasami jednak produkty mogą działać nieprawidłowo z powodu wad produkcyjnych. Dlatego oferujemy pełną roczną gwarancję od daty pierwotnego zakupu, która obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.

Gwarancja zastępcza jest ważna tylko wtedy, gdy do wymienianego produktu zostanie dołączony oryginalny paragon fiskalny wystawiony klientowi, zawierający datę zakupu.

Jeśli uważasz, że ten produkt jest uszkodzony, starannie zapakuj urządzenie i zwróć produkt autoryzowanemu sprzedawcy w okresie gwarancyjnym, wraz z oryginalnym paragone. Autoryzowany sprzedawca wymieni produkt, jeśli zostanie stwierdzona wada materiałowa lub wykonawcza.

Niniejsza ograniczona gwarancja wymiany nie ma zastosowania w przypadku nadużycia produktu, użycia niezgodnego z instrukcją Lucent, zwykłego zużycia, nieprawidłowego podłączenia, działania siły wyższej lub nieautoryzowanej naprawy.

## Översikt

- A. LED-lampor i blått och rött
- B. Pennor med PAP+ blekningsgel
- C. Tryckknapp
- D. Laddning med magnetisk anslutning
- E. Magnetisk laddningskabel

## INCI

Glycerin, Aqua, Phthalimidoperoxycaproic Acid, PVP, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Potassium Hydroxide, Potassium Citrate, Hydroxyapatite, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Mica, CI 77891, Saccharin Sodium, Piroctone Olamine

## Introduktion

### Tack för att du köpte Stellar whitening kit.

I blekningssetsen ingår PAP+ gelen, som rengör och bleker tänderna. Men det är också skonsamt mot tandköttet och munnen. Formulan är också utvecklad för att stödja stärkandet av tänderna efter behandling.

Aktivatorn är utrustad med LED-lampor, med blått och rött ljus, med våglängden mellan 480-520 nm. Detta aktiverar gelen och processen rengör tänderna från fläckar och märken och gör gula tänder vitare.

### Viktiga anteckningar

Första gången kanske du bara vill använda 10 minuter för att vänja dig vid processen.

Försök att undvika rökning och dricka kaffe, te eller rött vin under de följande timmarna efter behandlingen. Tänderna är känsligare för missfärgning direkt efter behandlingen.

## Försiktighetsåtgärder

Blekningsprocessen fungerar inte på konstgjorda tänder eller tänder som är skadade.

Whitening kit bör inte användas av gravida och ammande kvinnor eller barn under 16 år

Silikonskenan på aktivatorn är vattentät och bör rengöras under kranvatten. Men aktivatorns huvuddel är inte vattentät och får inte sänkas under vatten.

Håll inte kokande vatten på silikonskenan, eftersom det kan skada formen.

Undvik all kontakt med ögonen.

Saliven som produceras under blekningsprocessen är ok att svälja.

Om du skulle uppleva irritation eller svullet tandkött, vänligen avbryt programmet och kontakta en tandläkare.

Använd inte blekningssetsen när du sover.

Håll satsen borta för barn under 3 år.

Försök inte ta loss, deformera eller reparera enheten själv.

## Snabbguide

Blekningsprocessen bör upprepas i cirka 7 dagar. Vissa människor behöver ytterligare några dagar för att uppnå den önskade blekningseffekten.

Påfyllningsförpackningar finns på [be-lucent.com](http://be-lucent.com)

### 1. Förbered dina tänder

Borsta tänderna för att se till att de är rena. Torka sedan tänderna med en näsduk eller handduk.

### 2. Applicera gelen

Skruva av locket på tandblekningsgelen. Vrid botten av röret medurs tills gelén rinner in i borsten. Måla sedan gelén på dina tänder. Lägg till extra gel på gula tänder. Undvik att lägga gel på tandköttet.

### 3. Förbered blekningsaktivatorn

Placera munbrickan i munnen och bit försiktigt. Hitta den bästa passformen för dina tänder. Tryck sedan på knappen för att tända lampan.

### 4. Använd blekningsaktivatorn

Processen pågår i 20 minuter och stängs automatiskt av när den är klar. Ljuset pausar också i en halv sekund efter 10 minuter för att informera om halvtid.

### 5. Sköj i vatten

Sköj munnen med vatten efter att du tagit ut aktivatorn. Rengör munskaalen under kranvatten.

## Ett års begränsad garanti

Alla Be Lucent-produkter är designade och tillverkade för att möta höga förväntningar och för att ge den bästa kundupplevelsen. Men ibland kan produkter ha fel på grund av tillverkningsfel. Det är därför vi erbjuder ett helt års garanti från det ursprungliga inköpsdatumet, som täcker defekter i material och utförande.

Ersättningsgarantin är endast giltig om originalkvittot som utfärdats till kunden, med angivande av inköpsdatum, uppvisas tillsammans med produkten som ska ersättas.

Om du tror att denna produkt är defekt, packa om enheten försiktigt och returnera produkten till din auktoriserade säljare inom garantiperioden, med originalkvitto. Din auktoriserade säljare kommer att ersätta produkten, förutsatt att ett material- eller tillverkningsfel har identifierats.

Denna begränsade ersättningsgaranti gäller inte i fall av missbruk eller felaktig användning av produkten, användning i strid med Lucent's instruktioner, vanligt slitage, felaktig anslutning, force majeure eller otillåten reparation.

## Oversigt

- A. LED-lys i blå og rødt
- B. Rør med PAP+ blegegel
- C. Trykknop
- D. Opladning med magnetisk tilslutning
- E. Magnetisk opladningskabel

## INCI

Glycerin, Aqua, Phthalimidoperoxycaproic Acid, PVP, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Potassium Hydroxide, Potassium Citrate, Hydroxyapatite, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Mica, CI 77891, Saccharin Sodium, Piroctone Olamine

## Introduktion

**Tak, fordi du har købt Stellar blegningssæt.**

Blegesættet indeholder PAP+ gelen, som renser og bleger tænderne. Men det er også skånsomt for tandkødet og munden. Formlen er også udviklet til at understøtte styrkelsen af tænderne efter behandling.

Aktivatoren er udstyret med LED-lys, med blå og rødt lys, med en bølgelængde mellem 480-520 nm. Dette aktiverer gelen og processen renser tænderne for pletter og mærker og bleger gule tænder.

## Vigtige bemærkninger

Den første gang vil du måske kun bruge 10 minutter på at vænne dig til processen.

Forsøg at undgå at ryge og drikke kaffe, te eller rødvin i de følgende timer efter behandlingen. Tænderne er mere følsomme over for misfarvning umiddelbart efter behandlingen.

## Forholdsregler

Blegningsprocessen virker ikke på kunstige tænder eller tænder, der er beskadigede.

Whitening kit bør ikke bruges af gravide og ammende kvinder eller børn under 16 år

Silikoneskinnen på aktivatoren er vandtæt og bør rengøres under postevand. Men hoveddelen af aktivatoren er ikke vandtæt og må ikke nedsænkes under vand. Hæld ikke kogende vand på silikoneskinnen, da det kan beskadige formen.

Undgå al kontakt med øjnene.

Det spyt, der produceres under blegningsprocessen, er ok at sluge. Hvis du skulle opleve irritation eller hævede gummer, bedes du afbryde programmet og konsultere en tandlæge.

Brug ikke blegesættet, mens du sover.

Opbevar sættet utilgængeligt for børn under 3 år.

Forsøg ikke selv at adskille, deformere eller reparere enheden.

## Hurtig Guide

Blegningsprocessen skal gentages i ca. 7 dage. Nogle mennesker har brug for et par dage mere for at opnå den ønskede blegeeffekt.

Refill-pakker er tilgængelige

[be-lucent.com](http://be-lucent.com)

### 1. Forbered dine tænder

Børst dine tænder for at sikre, at de er rene. Tør derefter tænderne med et lommetørklæde eller håndklæde.

### 2. Påfør gelen

Skrul låget af tandblegningsgelen af. Drej bunden af røret med uret, indtil gelen flyder ind i børsten. Mal derefter gelen på dine tænder. Tilføj ekstra gel til gule tænder. Undgå at lægge gel på tandkødet.

### 3. Klargør blegeaktivatoren

Placer mundbakken i munden og bid forsigtigt. Find den bedste pasform til dine tænder. Tryk derefter på knappen for at tænde lampen.

### 4. Brug blegeaktivatoren

Processen varer i 20 minutter og lukker automatisk ned, når den er færdig. Lyset holder også pause i et halvt sekund efter 10 minutter for at informere om halvtid.

### 5. Skyl i vand

Skyl munden med vand efter at have fjernet aktivatoren. Rengør mundstykket under postevand.

## Et års begrænset garanti

Alle Be Lucent produkter er designet og fremstillet til at leve op til høje forventninger og give den bedste kundeoplevelse. Nogle gange kan produkter dog være defekte på grund af fabriktionsfejl. Det er derfor, vi tilbyder et helt års garanti fra den oprindelige købsdato, der dækker defekter i materialer og udførelse.

Udskiftningsgarantien er kun gyldig, hvis den originale kvittering, der er udstedt til kunden, med angivelse af købsdato, fremvises sammen med det produkt, der skal udskiftes.

Hvis du mener, at dette produkt er defekt, bedes du pakke enheden omhyggeligt ind og returnere produktet til din autoriserede forhandler inden for garantiperioden med den originale kvittering. Din autoriserede forhandler vil erstatte produktet, forudsat at der er identificeret en materiale- eller fabriktionsfejl.

Denne begrænsede garanti gælder ikke i tilfælde af misbrug eller misbrug af produktet, brug i strid med Lucent's instruktioner, normal slidage, ukorrekt tilslutning, force majeure eller uautoriseret reparation.

## Oversikt

- A. LED-lys i blått og rødt
- B. Rør med PAP+ blekegel
- C. Berøringsknapp
- D. Lading med magnetisk tilkobling
- E. Magnetisk ladekabel

## INCI

Glycerin, Aqua, Phthalimidoperoxycaproic Acid, PVP, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Potassium Hydroxide, Potassium Citrate, Hydroxyapatite, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Mica, CI 77891, Saccharin Sodium, Proctone Olamine

## Introduksjon

### Takk for at du kjøpte Stellar blekesett.

Blekesettet inkluderer PAP+ gelen, som renser og bleker tennene. Men den er også skånsom mot tannkjøttet og munnen. Formelen er også utviklet for å støtte styrking av tennene etter behandling.

Aktivatoren er utstyrt med LED-lys, med blått og rødt lys, med en bølgelengde mellom 480-520 nm. Dette aktiverer gelen og prosessen renser tennene fra flekker og merker og bleker gule tenner.

### Viktige notater

Den første gangen vil du kanskje bare bruke 10 minutter på å venne deg til prosessen.

Prøv å unngå å røyke og drikke kaffe, te eller rødvin de påfølgende timene etter behandlingen. Tennene er mer følsomme for misfarging umiddelbart etter behandlingen.

## Forholdsregler

Blekningsprosessen fungerer ikke på kunstige tenner eller tenner som er skadet.

Whitening kit bør ikke brukes av gravide og ammende kvinner eller barn under 16 år

Silikonskinnen på aktivatoren er vanntett og bør rengjøres under vann fra springen. Men hoveddelen av aktivatoren er ikke vanntett og må ikke senkes under vann.

Ikke hell kokende vann på silikonskinnen, da dette kan skade formen.

Unngå all kontakt med øynene.

Spyttet som produseres under blekningsprosessen er ok å svelge. Hvis du skulle oppleve irritasjon eller hovent tannkjøtt, vennligst avbryt programmet og kontakt en tannlege.

Ikke bruk blekesettet mens du sover. Oppbevar settet utilgjengelig for barn under 3 år.

Ikke forsøk å demontere, deformere eller reparere enheten selv.

## Hurtiginnføring

Blekningsprosessen bør opprepas i cirka 7 dager. Vissa människor behöver ytterligare några dagar för att uppnå den önskade blekningseffekten.

Påfyllningsförpackningar finns på

[be-lucent.com](http://be-lucent.com)

### 1. Forbered tennene

Børst tennene for å sikre at de er rene. Tørk deretter tennene med et lommetørkle eller håndkle.

### 2. Påfør gelen

Skrv av lokket på tannblekningsgelen. Vri bunnen av røret med klokken til gelen renner inn i børsten. Mal deretter gelen på tennene. Tilsett ekstra gel til gule tenner. Unngå å legge gel på tannkjøttet.

### 3. Klargjør blekeaktivatoren

Plasser munnbrettet i munnen og bit forsiktig. Finn den beste passformen til tennene dine. Trykk deretter på knappen for å slå på lampen.

### 4. Bruk blekningsaktivatoren

Prosessen varer i 20 minutter og slås av automatisk når den er ferdig. Lyset stopper også i et halvt sekund etter 10 minutter for å informere om halvtid.

### 5. Skyll i vann

Skyll munnen med vann etter at du har fjernet aktivatoren. Rengjør munnstykket under vann fra springen.

## Ett års begrenset garanti

Alle Be Lucent-produkter er designet og produsert for å møte høye forventninger og for å gi den beste kundeopplevelsen. Noen ganger kan imidlertid produkter være defekte på grunn av produksjonsfeil. Det er derfor vi tilbyr et helt års garanti fra den opprinnelige kjøpsdatoen, som dekker defekter i materialer og utførelse.

Erstatningsgarantien er kun gyldig dersom den originale kvitteringen som er utstedt til kunden, med angivelse av kjøpsdato, vises sammen med produktet som skal erstattes.

Hvis du mener at dette produktet er defekt, vennligst pakk enheten forsiktig inn og returner produktet til din autoriserte forhandler innen garantiperioden, med den originale kvitteringen. Din autoriserte forhandler vil erstatte produktet, forutsatt at en material- eller produksjonsfeil er identifisert.

Denne begrensede garantien gjelder ikke i tilfeller av misbruk eller misbruk av produktet, bruk i strid med Lucent's instruksjoner, normal slitasje, feil tilkobling, force majeure eller uautorisert reparasjon.

## Yleiskatsaus

- A. LED-valot sinisenä ja punaisena
- B. PAP+ valkaisugeelin putket
- C. Kosketuspainike
- D. Lataus magneettiliitännällä
- E. Magneettinen latauskaapeli

## INCI

Glycerin, Aqua, Phthalimidoperoxycaproic Acid, PVP, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Potassium Hydroxide, Potassium Citrate, Hydroxyapatite, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Mica, CI 77891, Saccharin Sodium, Proctone Olamine

## Johdanto

### Kiitos, että ostit Stellar-valkaisusarjan.

Valkaisusarja sisältää PAP+-geelin, joka puhdistaa ja valkaisee hampaat. Mutta se on myös hellävarainen ikenille ja suulle. Koostumus on myös kehitetty tukemaan hampaiden vahvistumista hoidon jälkeen.

Aktivaattori on varustettu LED-valoilla, joissa käytetään sinistä ja punaista valoa, aallonpituudella 480-520 nm. Tämä aktivoi geelin ja prosessi puhdistaa hampaat tahroista ja naarmuista ja tekee hampaista kellertävämmiksi.

### Tärkeät muistiinpanot

Ensimmäisellä kerralla saatat haluta käyttää vain 10 minuuttia tottuaksesi prosessiin.

Yritä välttää tupakointia ja kahvin, teen tai punaviinin juomista seuraavien tuntien ajan hoidon jälkeen. Hampaat ovat herkempiä värjäytymiselle heti hoidon jälkeen.

## Varotoimenpiteet

Valkaisuprosessi ei toimi tekohampailla eikä vaurioituneilla hampailla.

Valkaisusarjaa eivät saa käyttää raskaana olevat ja imettävät naiset tai alle 16-vuotiaat lapset

Aktivaattorin silikonikisko on vesitiivis ja se tulee puhdistaa vesijohtoveden alla. Mutta aktivaattorin päärunko ei ole vedenpitävä, eikä sitä saa upottaa veteen.

Älä kaada kiehuvaa vettä piikiskon päälle, koska se voi vahingoittaa muotoa.

Vältä aineen joutumista silmiin.

Valkaisuprosessin aikana muodostuva sylki on ok nieltävä.

Jos koet ärsytystä tai turvotusta ikenistä, keskeytä ohjelma ja ota yhteyttä hammaslääkäriin.

Älä käytä valkaisusarjaa nukkuessasi.

Pidä pakkaus poissa alle 3-vuotiaille lapsille.

Älä yritä irrottaa, muuttaa tai korjata laitetta itse.

## Pikaopas

Valkaisuprosessi tulee toistaa noin 7 päivän ajan. Jotkut ihmiset tarvitsevat muutaman päivän lisää saavuttaakseen halutun valkaisuvaikutuksen.

Täyttöpakkaukset ovat saatavilla osoitteessa [be-lucent.com](http://be-lucent.com)

### 1. Valmistele hampaasi

Harjaa hampaasi varmistaaksesi, että ne ovat puhtaita. Kuivaa sitten hampaat iinalla tai pyyhkeellä.

### 2. Levitä geeliä

Kierrä hampaiden valkaisugeelin kansi auki. Kierrä putken pohjaa myötäpäivään, kunnes geeli valuu harjaan. Maalaa sitten geeli hampaillesi. Lisää ylimääräistä geeliä keltaisiin hampaisiin. Vältä geelin levittämistä ikenille.

### 3. Valmistele valkaisuaktivaattori

Aseta suutarjotin suuhusi ja pure kevyesti. Löydä hampaillesi sopivin. Paina sitten painiketta kytkeäksesi valot päälle.

### 4. Käytä valkaisuaktivaattoria

Prosessi kestää 20 minuuttia ja sammuu automaattisesti, kun se on valmis. Valo pysähtyy myös puolen sekunnin ajaksi 10 minuutin kuluttua ilmoittaakseen puoliajasta.

### 5. Huuhtele vedessä

Huuhtele suusi vedellä aktivaattorin poistamisen jälkeen. Puhdista suuaukko vesijohtoveden alla.

## Yhden vuoden rajoitettu takuu

Kaikki Be Lucentin tuotteet on suunniteltu ja valmistettu täyttämään korkeita odotuksia ja tarjoamaan parhaan asiakaskokemuksen. Joskus tuotteissa voi kuitenkin olla toimintahäiriöitä valmistusvirheiden vuoksi. Tästä syystä tarjoamme täyden vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.

Vaihtotakuu on voimassa vain, jos vaihdettavan tuotteen mukana esitetään asiakkaalle annettu alkuperäinen kuitti, jossa on ostopäivämäärä.

Jos uskot tämän tuotteen olevan viallinen, pakkaa laite huolellisesti uudelleen ja palauta tuote valtuutetulle myyjälle takuuaajan kuluessa alkuperäisen kuitin kanssa. Valtuutettu myyjä vaihtaa tuotteen, mikäli materiaali- tai valmistusvirhe havaitaan.

Tämä rajoitettu vaihtotakuu ei koske tuotteen väärinkäyttöä, Lucentin ohjeiden vastaista käyttöä, tavanomaista kulumista, virheellistä liitäntää, ylivoimaista estettä tai luvaton korjausta.

[be-lucent.com](http://be-lucent.com)